


Hercules®

3 STAGE BALLOON



Features



ガイドワイヤなし^{*1} (A)

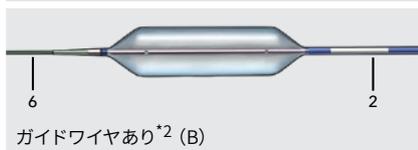

ガイドワイヤあり^{*2} (B)

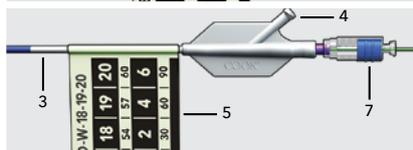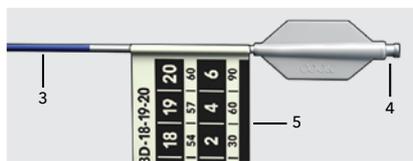

- 1) ラピッドデフレーションスリーブ
- 2) 銀色の位置インジケータ
- 3) エクスプレスエバキュエーションカテーテル
- 4) インフレーションハブ


- 5) 暗所で確認できる蛍光のカテーテルタグ
- 6) 300 cm ガイドワイヤ
- 7) ワイヤロッキング

Step 1a




60 mL インフレーションデバイスに水を充填します。シリンジ内の空気や余分な水を取り除くために、気泡が上部のルアーロック部分に集まるよう、シリンジと接続チューブを傾けます。シリンジと接続チューブから空気や余分な水がすべて取り除かれ、水量が 40 mL になるまでハンドルを押し入れます。

Step 1b

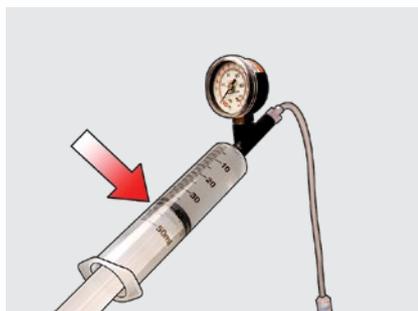

図のように、シリンジ内の水量を 40 mL に保ちます。

Step 2

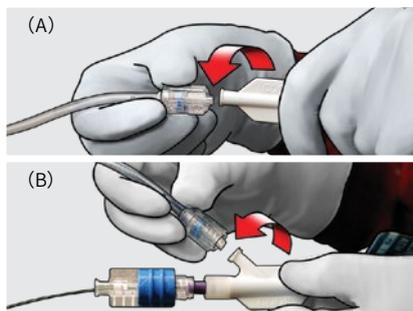


インフレーションデバイスにバルーンのインフレーションポートをしっかり取り付けます。

Step 3




陰圧をかけます。

Step 4

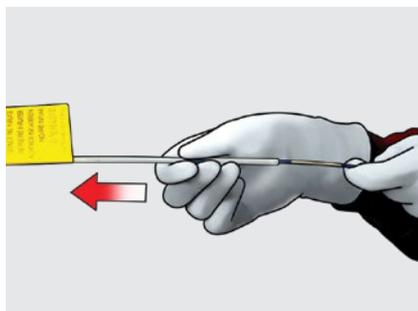


バルーンから保護シースを抜去します。

Step 5

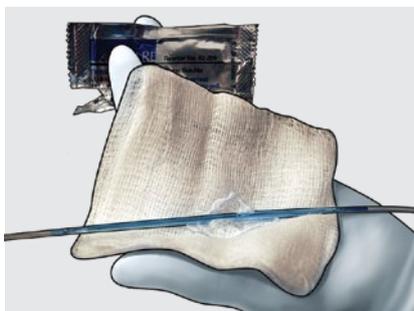


バルーンに潤滑剤を塗布します。内視鏡への挿入前にバルーンの前拡張をしないでください。内視鏡下で位置インジケータを確認した後、目的の位置までバルーンを進めます。

Step 5.5 (オプション)

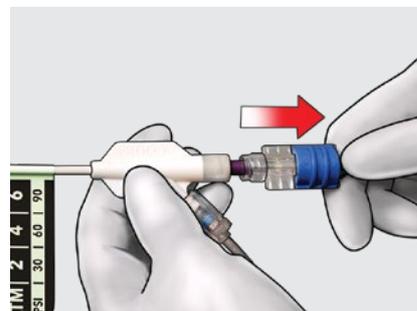

(ガイドワイヤ付きバルーンのみ)
ガイドワイヤ付きバルーンでガイドワイヤを進めるには、青いワイヤロックを「ON」の位置にします。

Step 6

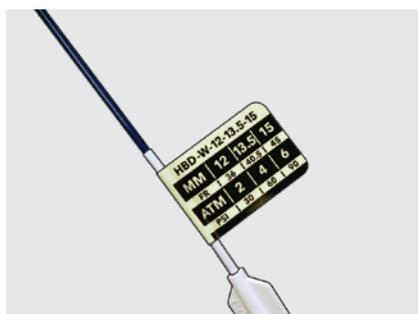

カテーテルのタグに表示されている圧力のとおり圧力を上げます。

Step 7



デフレーションのため、陰圧をかけます。バルーンが収縮したら、スコープからバルーンを抜去します。

カタログ番号

グローバル製品番号

HBD-8-9-10 G31928

HBD-10-11-12 G31925

HBD-12-13.5-15 G31926

HBD-15-16.5-18 G48732

HBD-18-19-20 G31927

HBD-W-8-9-10 G51799

HBD-W-10-11-12 G51795

HBD-W-12-13.5-15 G51796

HBD-W-15-16.5-18 G51797

HBD-W-18-19-20 G51798

詳しい使用方法については、最新の添付文書を参照してください。



製造販売元
クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL: 03-6853-9470
cookmedical.co.jp