

From cytology to histology:
Continuing to increase your
predictive values.




EchoTip ProCore[®]
HD ULTRASOUND BIOPSY NEEDLE



Get to the core issue throughout the entire GI tract.

組織・細胞採取能を備えた EchoTip ProCore は、消化管全体にアクセス可能です。標的病変が小さくても、少ない穿刺回数で十分な量の採取が可能です¹

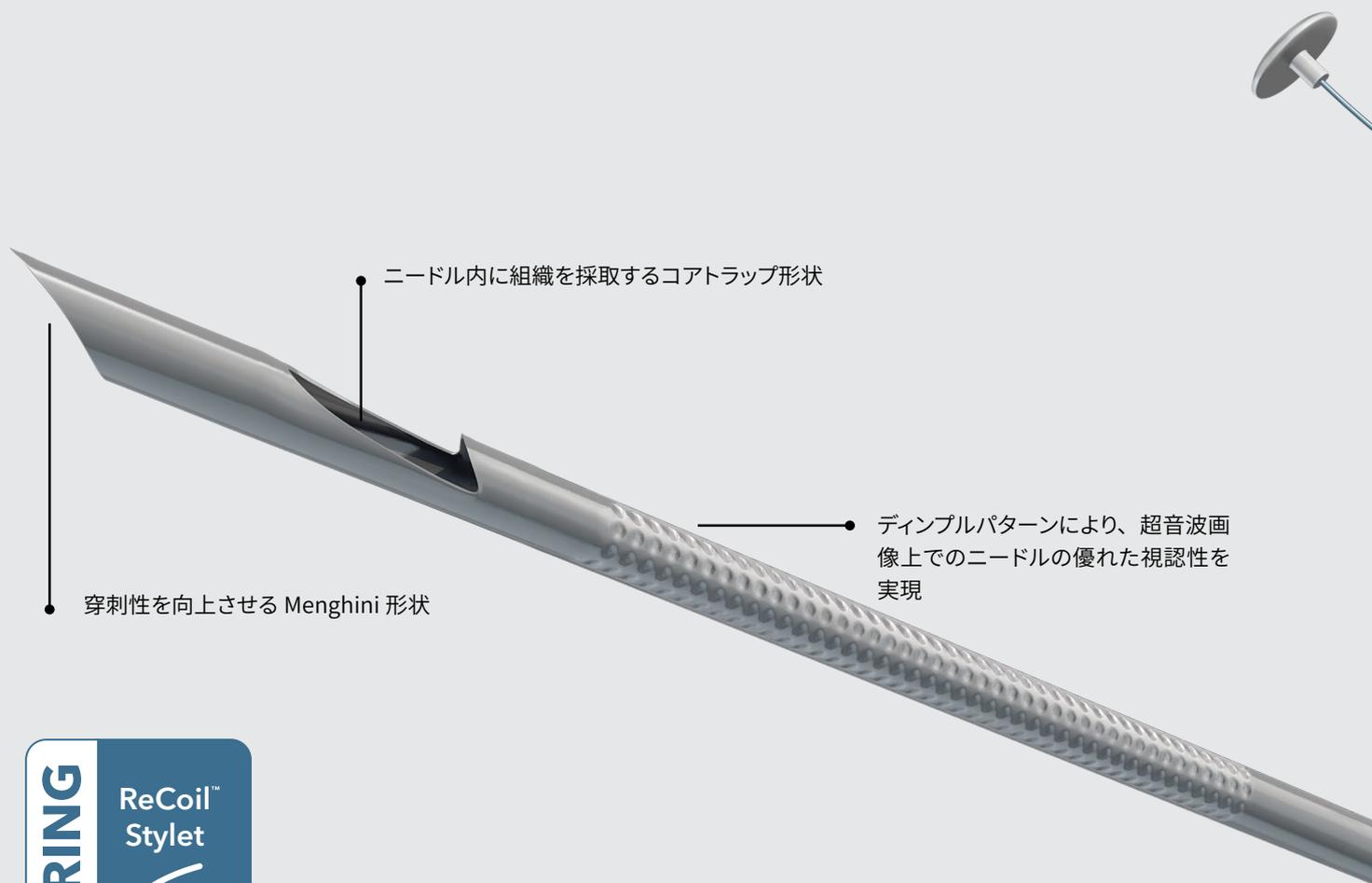


● ニードル内に組織を採取するコアトラップ形状

● 穿刺性を向上させる Menghini 形状

● ディンプルパターンにより、超音波画像上でのニードルの優れた視認性を実現




¹ Ken Kamata, Masayuki Kitano et al. Histologic diagnosis of pancreatic masses using 25-gauge endoscopic ultrasound needles with and without a core trap: a multicenter randomized trial Endoscopy 2016; Volume 48(07)

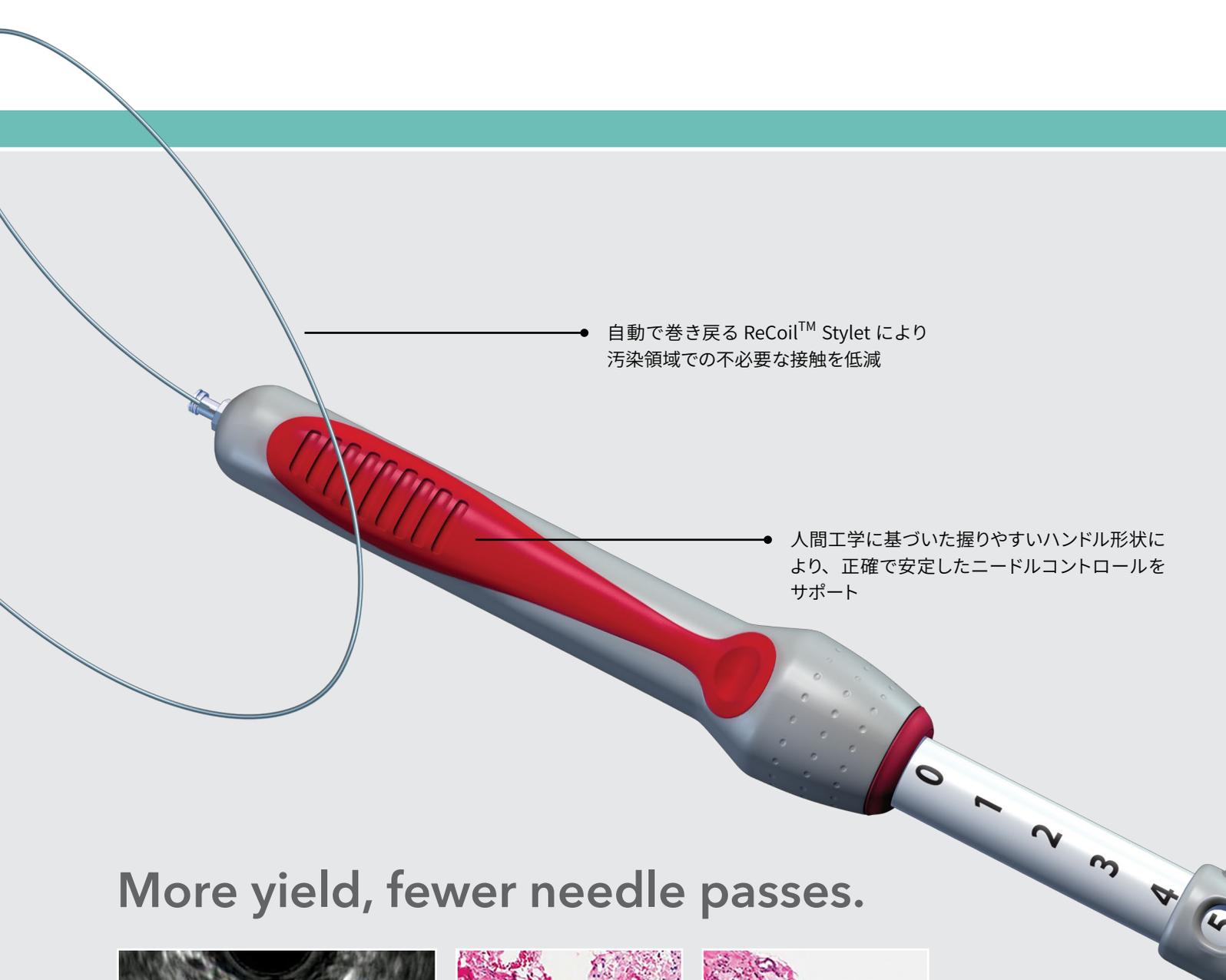


自動で巻き戻る ReCoil™ Stylet により
汚染領域での不必要な接触を低減

人間工学に基づいた握りやすいハンドル形状により、
正確で安定したニードルコントロールをサポート


More yield, fewer needle passes.

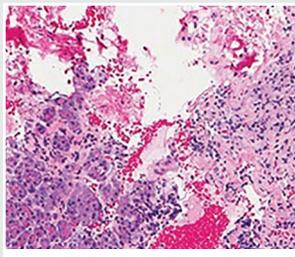

Cell Block

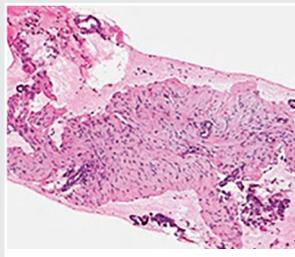


Core

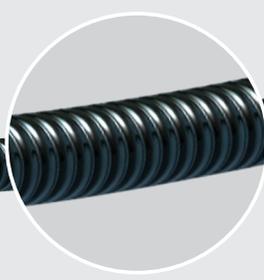

優れた柔軟性を備えた
コイルスプリングシース
デザイン

Ultrasound image courtesy of Kenneth Chang, MD
H. H. Chao Comprehensive Digestive Disease Center,
University of California-Irvine.

Pathology images courtesy of James Farrell, MD
Interventional Endoscopy and Pancreatic Diseases Section
of Digestive Diseases, Yale University School of Medicine.

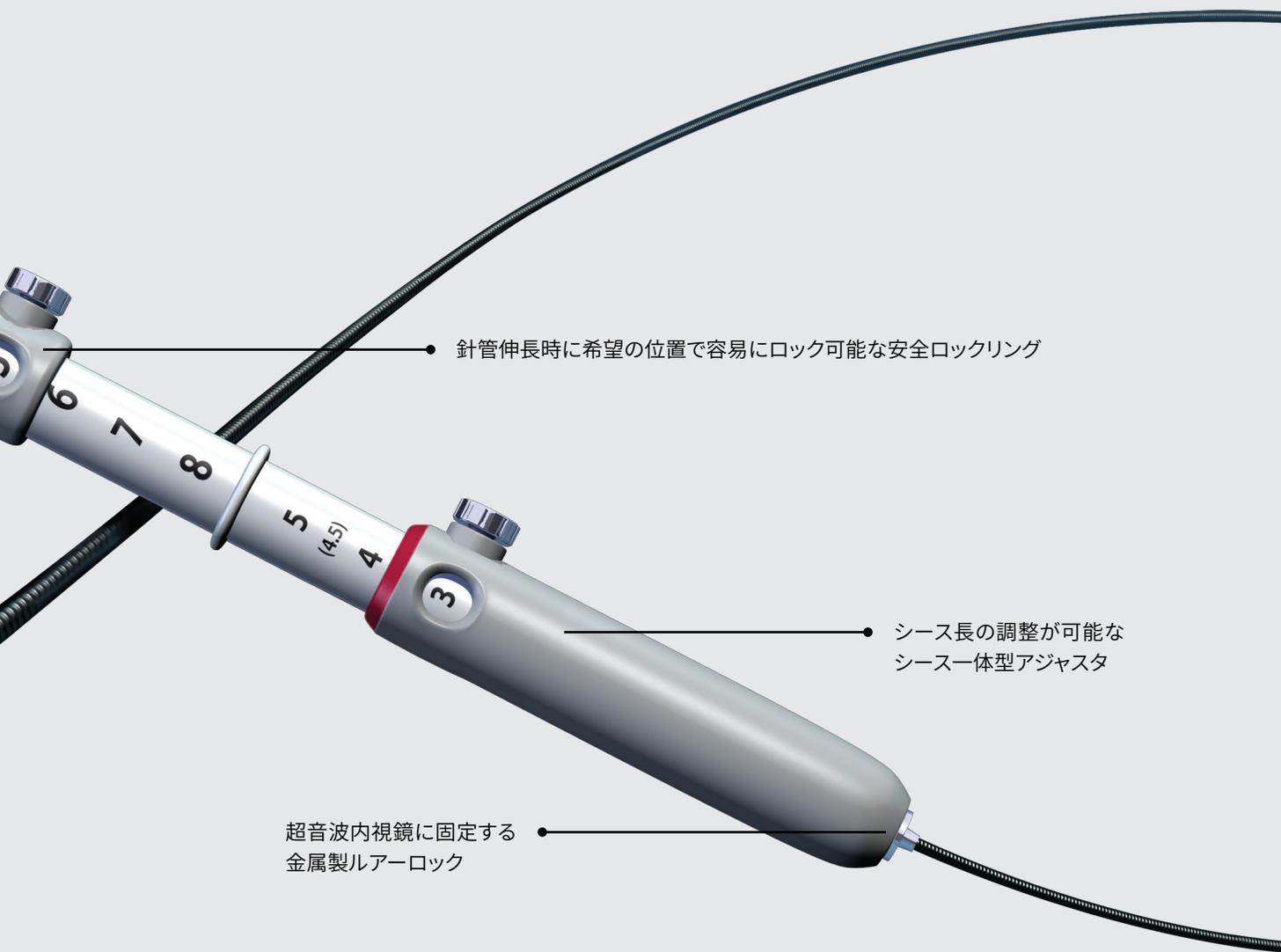



● 針管伸長時に希望の位置で容易にロック可能な安全ロックリング

● シース長の調整が可能な
シース一体型アジャスタ

● 超音波内視鏡に固定する
金属製ルアーロック

Leading innovation in EUS since 1998.

長年にわたり、Cook は医療従事者の方々が重要だと話されることに耳を傾けてきました。そして幅広いフィードバックに基づき、ニードルの柔軟性と組織検体の採取能に優れた最新の開発品を提供し続けてまいりました。それらは様々なニーズに合わせて調整され、臨床データによってその有効性が十分に裏付けられています。

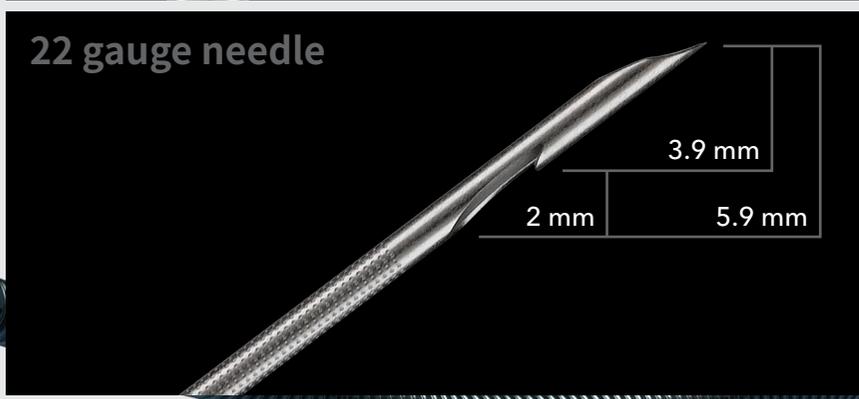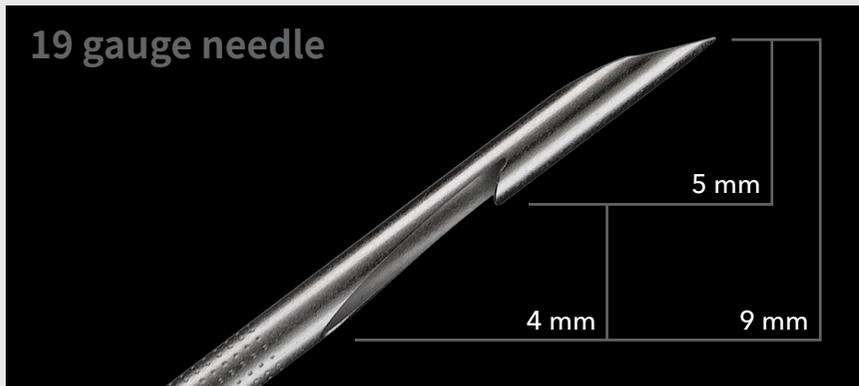

Product Specifications

消化管内、またはこれらに隣接する粘膜下病変、縦隔腫瘍、リンパ節、および腹腔内腫瘍に対し、超音波内視鏡下において診断に必要な微細組織採取に使用します。

滅菌済み、単回使用のディスポーザブル製品です。

グローバル 製品番号	カタログ 番号	ニードル サイズ G	シース サイズ Fr	ニードル 伸長可能域 cm	スタイルット タイプ	最小 適合鉗子 チャンネル mm
G53585	ECHO-HD-19-C	19	4.8	0-8	ボール型チップ	2.8
G34785	ECHO-HD-3-20-C*	20	7.95	0-8	ボール型チップ	3.7
G55736	ECHO-HD-22-C	22	5.2	0-8	ボール型チップ	2.8
G55738	ECHO-HD-25-C	25	5.2	0-8	ベベル型チップ	2.8

*ReCoil Stylet は、EchoTip ProCore 20 ゲージでのみご使用いただけます。

販売名：COOK 生検針 EchoTip ProCore

認証番号：224AABZX00007000

販売名：COOK 超音波内視鏡下生検針 EchoTip ProCore

認証番号：227AABZX00120000

製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL: 03-6853-9470
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4426793000, india.orders@cookmedical.com
Japan: +81 368539470, info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 79621688, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
Taiwan: +866 266283500, cooktw@cookmedical.com
Thailand: +662 1688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com

