
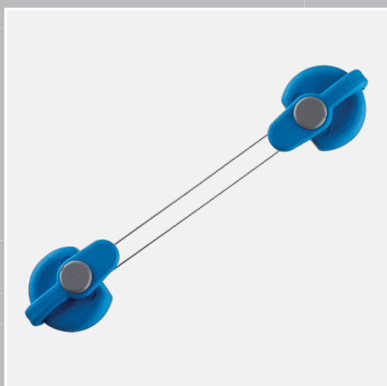
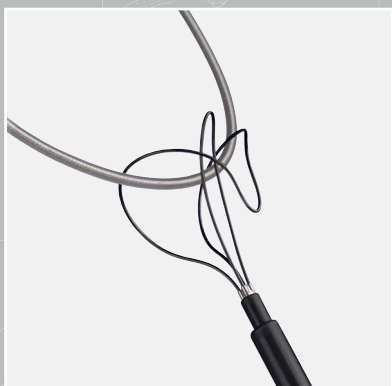


Devices for Lead Extraction

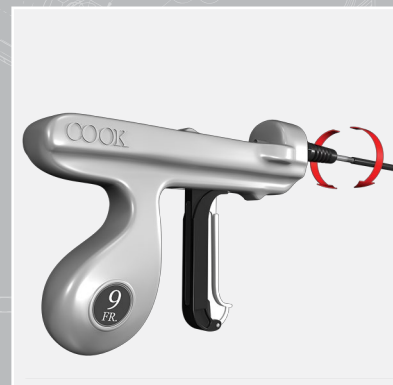

Product Reference Guide

Superior Approach

LEAD CONTROL	グローバル 製品番号	カタログ 番号	ページ
Liberator® Beacon® Tip Locking Stylet	G26550	LR-OFA01	4
One-Tie® Compression Coil	G31929	LR-OTE-N	4
Bulldog™ Lead Extender	G46542	LR-LED01	5

VESSEL ENTRY	グローバル 製品番号	カタログ 番号	ページ
Evolution® Shortie RL Controlled-Rotation Dilator Sheath Set	G23748	LR-EVN-SH-9.0-RL	6
	G23749	LR-EVN-SH-11.0-RL	6
SteadySheath® Evolution® Shortie Tissue Stabilization Sheath	G31908	LR-TSS-SH-9.0	8
	G31923	LR-TSS-SH-11.0	8
Byrd Telescoping Stainless Steel Dilator Sheath Set	G20000	LR-TELSST002	9

SHEATH EXTRACTION	グローバル 製品番号	カタログ 番号	シースタイプ	ページ
Evolution® RL Controlled-Rotation Dilator Sheath Set	G23737	LR-EVN-9.0-RL		7
	G23746	LR-EVN-11.0-RL		7
	G23747	LR-EVN-13.0-RL		7
SteadySheath® Evolution® Tissue Stabilization Sheath	G25082	LR-TSS-9.0		8
	G25083	LR-TSS-11.0		8
	G25084	LR-TSS-13.0		8
Byrd Polypropylene Dilator Sheath Set	G26562	LR-PPLBES-7.0	レギュラー	9
	G26563	LR-PPLBES-7.0-XL	エクストラロング	9
	G19893	LR-PPLBES-8.5	レギュラー	9
	G20534	LR-PPLBES-8.5-XL	エクストラロング	9
	G19859	LR-PPLBES-10.0	レギュラー	9
	G20535	LR-PPLBES-10.0-XL	エクストラロング	9
	G19860	LR-PPLBES-11.5	レギュラー	9
	G20525	LR-PPLBES-11.5-XL	エクストラロング	9
	G26514	LR-PPLBES-13.0	レギュラー	9
	G20526	LR-PPLBES-13.0-XL	エクストラロング	9


Femoral Approach

FEMORAL LEAD EXTRACTION	グローバル 製品番号	カタログ 番号	ページ
スネアカテール® およびワークステーション	G26517	LR-NES001	10
	G26515	LR-NES002	10
	G26533	LR-NES541	10
カーブ型 16 Fr イントロデューサシース (ワークステーション)	G26566	LR-CSS16	10
カーブ型 12 Fr シース	G26505	LR-CRVFEM001	10

LEAD EXTRACTION ACCESSORIES	グローバル 製品番号	カタログ 番号	ページ
リードクリップ	G20003	LR-CLP001	11
コイルエクスパンダ	G20005	LR-CEX001	11
ストレートスタイレットワイヤ	G20006	LR-ST5001	11
Sof-Grip ヘモスタット	G20001	LR-SGH001	11

Superior Approach

LEAD CONTROL

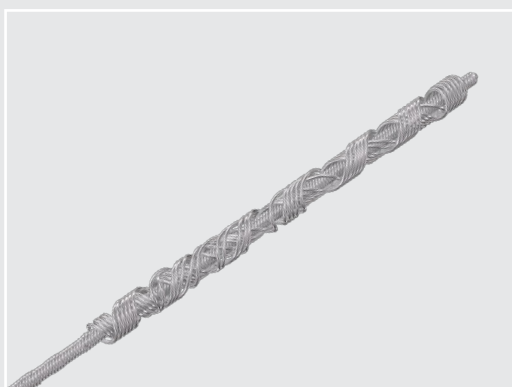

Liberator® Beacon® Tip Locking Stylet

エックス線不透過性のLiberator® Beacon® Tip Locking Styletは、ルーメンを有する植込み型ペースメーカー・除細動器リードの抜去をサポートします。リードのコネクタを取り除いた後、コイルルーメン内へ本品を挿入し、リードの遠位端をしっかり把持します。適合リード内径は0.41～0.81mm (0.016～0.032 inch) です。

特長

- 縫合糸を縫い付けられるハンドル
- ダイレータシースのためのレール効果を確立
- エックス線不透過性チップ

グローバル
製品番号

カタログ
番号

全長
cm

有効長
cm


G26550

LR-OFA01

140

70

販売名：COOK リード抜去システム
承認番号：22700BZX00054000

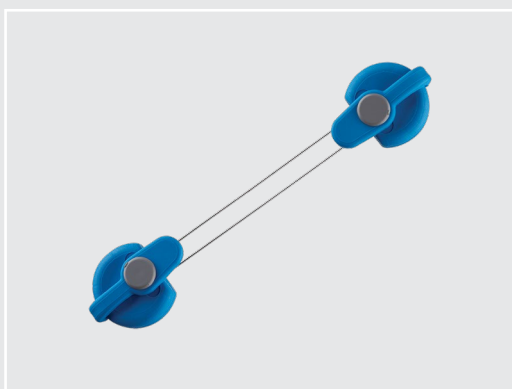

One-Tie® Compression Coil

One-Tie® Compression Coilは、標的リード遠位部を把持したLiberator® Beacon® Tip Locking Stylet*の近位部とリードの構成部品をしっかり巻きつけるために用いられ、リード抜去のコントロールを容易にします。リードの遠位端と近位端両方で保持することで、安定したレール効果を確立します。

*One-Tie® Compression Coilは、Liberator® Beacon® Tip Locking Styletとのみ使用できます。

グローバル
製品番号

カタログ
番号


数量

G31929

LR-OTE-N

1

販売名：COOK リード抜去システム
承認番号：22700BZX00054000

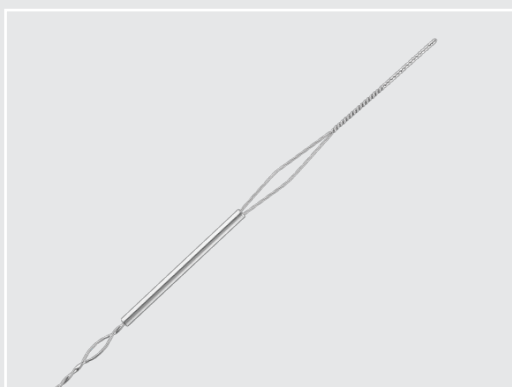

Bulldog™ Lead Extender

Bulldog™ Lead Extenderは、ルーメンのないリードやケーブル導線を内蔵する除細動器リードの抜去に使用します。Bulldog™ Lead Extenderを接続してリードを延長させることで、ダイレータシースを通すことができます。本品のループにリードまたはケーブル導線を通し、カラー（金属スリーブ）を遠位側にスライドさせると、リードをしっかりと把持して抜去できるようになります。

特長

- ロッキング機構
- ダイレータシースと併用可能
- 縫合糸を縫いつけられるスーチャループ

グローバル
製品番号

カタログ
番号

全長
cm

G46542

LR-LED01

70

販売名：COOK リード抜去システム
承認番号：22700BZX00054000

VESSEL ENTRY




Evolution® Shortie RL Controlled-Rotation Dilator Sheath Set

リード挿入部用にデザインされた Evolution® Shortie RL Rotation
ダイレータシースは、植込み型ペースメーカ・除細動器リードの周
りの癒着組織または高度石灰化組織を剥離するために使用します。
アウターシースはピールアウェイが可能です。シース長を短くするこ
とでたわみを抑え、操作性の向上が期待できます。

特長

- 双方向への回転または連続的な一方向への回転が可能
- 十角形状の先端チップ
- 非スクリュー構造
- Liberator®*、One-Tie®*、Bulldog™* のすべてのリードコント
ロールデバイスと併用可能

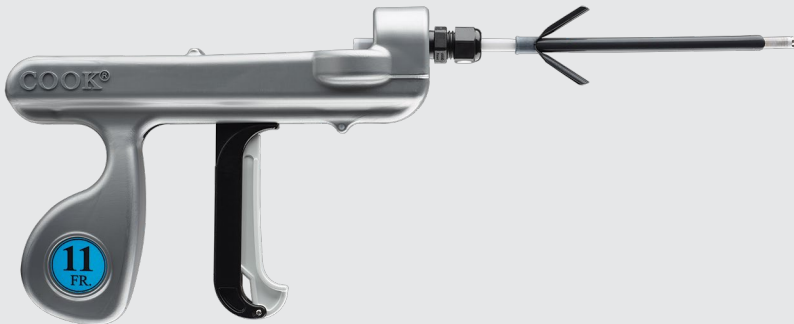

グローバル 製品番号	カタログ 番号	ステンレス鋼チップ 内径 Fr	シース有効長 cm
G23748	LR-EVN-SH-9.0-RL	9.0	13.6
G23749	LR-EVN-SH-11.0-RL	11.0	13.6

販売名：COOK Evolution RL Rotationダイレータシースセット
承認番号：22900BZX00266000
*販売名：COOK リード抜きシステム
*承認番号：22700BZX00054000

SHEATH EXTRACTION



Evolution® RL

Controlled-Rotation Dilator Sheath Set

Evolution® RL Rotation ダイレータシースは植込み型ペースメーカー・除細動器リードの挿入部から心腔内までの範囲における癒着組織を剥離するために使用します。PTFE 製のアウトアシースは癒着組織の剥離とカウンタトラクション目的で使用できます。

特長

- 双方向への回転または連続的な一方向への回転が可能
- 十角形状の先端チップ
- 非スクリュー構造
- Liberator®*、One-Tie®*、Bulldog™* のすべてのリードコントロールデバイスと併用可能
- ペースメーカーと除細動器のいずれのリードにも対応するサイズ展開



グローバル 製品番号	カタログ 番号	ステンレス鋼チップ 内径 Fr	シース有効長 cm
G23737	LR-EVN-9.0-RL	9.0	40.6
G23746	LR-EVN-11.0-RL	11.0	40.6
G23747	LR-EVN-13.0-RL	13.0	40.6

販売名：COOK Evolution RL Rotationダイレータシースセット
承認番号：22900BZX00266000

*販売名：COOK リード抜きシステム

*承認番号：22700BZX00054000

VESSEL ENTRY / SHEATH EXTRACTION



SteadySheath®

Evolution® Tissue Stabilization Sheath

Evolution Steady 交換用アウターシース、Evolution Shortie Steady 交換用アウターシースは、細かい切り込みを施したステンレス鋼チップで標的リードの癒着組織を押さえ固定する交換用アウターシースです。インナーシースの回転に追従して動いてしまう癒着組織を押さえることにより、インナーシースの操作性を向上させます。

特長

- エックス線透視下での視認性
- 柔軟性と低摩擦性を有するPTFEを使用
- SteadySheath® は、Evolution® RL Rotation ダイレータシースおよびEvolution® Shortie RL Rotation ダイレータシースの製品サイズに適合

交換用アウターシース

グローバル 製品番号	カタログ 番号	製品サイズ Fr	内径 Fr	外径 Fr	全長 cm
SteadySheath Evolution Shortie Tissue Stabilization Sheath					
G31908	LR-TSS-SH-9.0	9.0	14.2	17.2	11.2
G31923	LR-TSS-SH-11.0	11.0	16.2	19.4	11.2
SteadySheath Evolution Tissue Stabilization Sheath					
G25082	LR-TSS-9.0	9.0	14.2	17.2	36.5
G25083	LR-TSS-11.0	11.0	16.2	19.4	36.5
G25084	LR-TSS-13.0	13.0	18.1	21.3	36.5

販売名：COOK Evolution RL Rotationダイレータシースセット
承認番号：22900BZX00266000



Byrd Dilator Sheath Sets

Byrd ダイレータシースセットは植込み型ペースメーカー・除細動器リードの癒着組織を剥離するために使用します。ステンレス製シースは静脈へのアクセスを確保した後に、適切なサイズのポリプロピレン製シースに交換します。ポリプロピレン製シースは、内径サイズによって色分けされています。

特長


- エックス線透視下での視認性
- ポリプロピレン製シースにはレギュラーとエクストラロングの2サイズ

グローバル 製品番号	カタログ 番号	サイズ	カラー	シース長 インナーシース / アウターシース	インナーシース 内径 / 外径 Fr	アウターシース 内径 / 外径 Fr
ポリプロピレン製シース						
G26562	LR-PPLBES-7.0	レギュラー	ブルー	38 / 33	7.0/9.3	10.0/12.3
G26563	LR-PPLBES-7.0-XL	エクストラロング	ブルー	46 / 41	7.0/9.3	10.0/12.3
G19893	LR-PPLBES-8.5	レギュラー	イエロー	38 / 33	8.5/10.7	11.6/13.9
G20534	LR-PPLBES-8.5-XL	エクストラロング	イエロー	46 / 41	8.5/10.7	11.6/13.9
G19859	LR-PPLBES-10.0	レギュラー	グリーン	38 / 33	10.0/12.1	13.1/15.2
G20535	LR-PPLBES-10.0-XL	エクストラロング	グリーン	46 / 33	10.0/12.1	13.1/15.2
G19860	LR-PPLBES-11.5	レギュラー	ホワイ	38 / 33	11.5/13.6	14.1/16.3
G20525	LR-PPLBES-11.5-XL	エクストラロング	ホワイ	46 / 41	11.5/13.6	14.1/16.3
G26514	LR-PPLBES-13.0	レギュラー	オレンジ	38 / 33	13.0/15.3	16.0/18.1
G20526	LR-PPLBES-13.0-XL	エクストラロング	オレンジ	46 / 41	13.0/15.3	16.0/18.1
ステンレス製シース						
G20000	LR-TELSST002				10.4/11.9	12.7/13.7

販売名：COOK リード抜きシステム
承認番号：22700BZX00054000

Femoral Approach

FEMORAL LEAD EXTRACTION

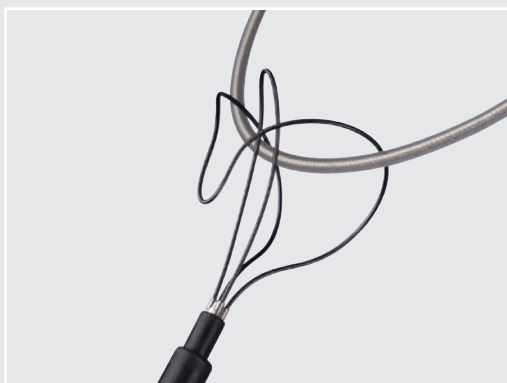

Needle's Eye Snare®


植込み型ペースメーカー・除細動器リード、カテーテル、ガイドワイヤ等の異物を経皮的に除去するために使用します。経静脈的にアプローチする捕捉デバイスであり、止血弁付 16Fr イントロデューサシースを介して 12Fr シースのスネアカテーテルを対象物の近くまで到達させます。

特長

- スレッドを引き戻すだけで、素早く把持を解除できます。
- 静脈内での位置決めを向上させるためにカーブ型 12Fr シースへの交換が可能。
- フラッシュポートは、シース最内側のルーメンと繋がっています。
- カーブ型 16Fr イントロデューサシース (LR-CSS16) にも、セルジンガー法で用いる構成が含まれます。



カーブ型 16Fr イントロデューサシース

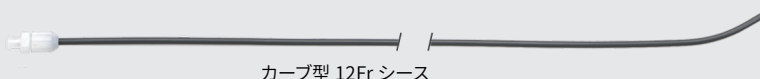

カーブ型 12Fr シース

グローバル 製品番号	カタログ 番号	スネア径 mm	全長 cm
スネアカテーテルおよびワークステーション*			
G26517	LR-NES001	13	94
G26515	LR-NES002	20	94
G26533**	LR-NES541	13	54

* スネアカテーテル (ストレート型 12Fr シース)、ストレート型 16Fr イントロデューサシース、ダイレクタ、ガイドワイヤ (0.038 inch)、穿指針 (18G)、注射筒を含む。

** 上記の構成品に加え、スネアカテーテル (カーブ型 12Fr シース) を含む。

グローバル 製品番号	カタログ 番号	シース外径 Fr	シース長 cm
カーブ型 16 Fr イントロデューサシース (ワークステーション)			
G26566	LR-CSS16	16.0	69.5
カーブ型 12 Fr シース			
G26505	LR-CRVFEM001	12.0	91.5

販売名: COOKニードルズアイスネア
承認番号: 22600BZX00538000


LEAD EXTRACTION ACCESSORIES

グローバル カタログ
製品番号 番号

リードクリップ

G20003 LR-CLP001

植込み型ペースメーカーや除細動器のリードからコネクタ端子を切断します。

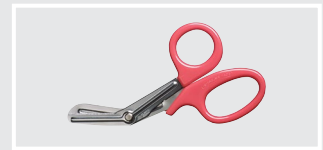

コイルエクспанダー

G20005 LR-CEX001


Liberator® Beacon® Tip Locking Stylet やストレートスタイレットワイヤを挿入できるように、切断したリードのインナーコイルの圧潰部を広げます。



ストレートスタイレットワイヤ

G20006 LR-ST5001

リードのルーメンが先端部まで確保されていることを確認します。長さ 65 cm 径 0.015 inch (0.38 mm) です。

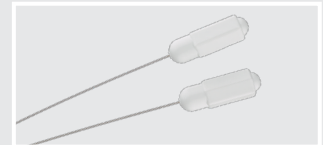

Sof-Grip ヘモスタット

G20001 LR-SGH001

植込み型ペースメーカーや除細動器のリードを破損させることなく把持します。



販売名：COOK リード抜去システム
承認番号：22700BZX00054000



製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL: 03-6853-9470
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4426793000, india.orders@cookmedical.com
Japan: +81 368539470, info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 79621688, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
Taiwan: +866 266283500, cooktwn@cookmedical.com
Thailand: +662 1688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com

