

Access redefined.



Acrobat[®] 2

CALIBRATED TIP WIRE GUIDE

日々のERCPで術者が常に求めるのは、いかなる状況でも簡単で確実なアクセスを実現することです。ルーチンのERCP、過酷で複雑な症例など、Acrobat 2 Wire Guideは先端部の柔軟性と高いプッシュビリティにより、状況に応じたアクセスを実現し、確実な手技をサポートします。

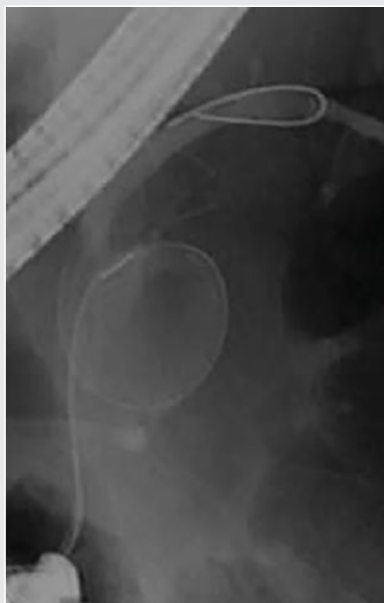


Image courtesy of Giuseppe Aliperti, MD
St. Louis, Missouri

Acrobot® 2

CALIBRATED TIP WIRE GUIDE

ERCP中のカニキュレーションを容易にし、スムーズな通過性をサポートします。
滅菌済み、単回使用のディスポーザブル製品です。

- **損傷を抑制する先端デザイン：**
柔軟で精密な先端部のスプリングコイルが、接触による膵胆道組織の損傷を抑制
- **プッシュビリティ：**
太いナイチノール製コアの採用により、良好なプッシュビリティを実現
- **位置と動きを明視化：**
Mark V System®により、ワイヤの動きと挿入深度を高コントラストで表示
- **X線透視下での視認性を確保するプラチナ製スプリングコイル：**
4 cmのプラチナ製スプリングコイルがX線透視下での視認性をサポート
- **スムーズなアクセス：**
5.8 cmの親水性コーティングが摩擦を軽減し、優れたトラッカビリティと困難な部位の通過を実現

グローバル 製品番号	カタログ 番号	ガイドワイヤ 径 inch	ガイドワイヤ 全長 cm	X線不透過性 チップ長 cm	親水性 コーティング 長 cm	先端 形状
G47608	AWG2-25-260	0.025	260	4	5.8	ストレート型
G47609	AWG2-25-260-A	0.025	260	4	5.8	カーブ型
G47610	AWG2-25-450	0.025	450	4	5.8	ストレート型
G47611	AWG2-25-450-A	0.025	450	4	5.8	カーブ型
G47612	AWG2-35-205	0.035	205	4	5.8	ストレート型
G47613	AWG2-35-205-A	0.035	205	4	5.8	カーブ型
G47614	AWG2-35-260	0.035	260	4	5.8	ストレート型
G47615	AWG2-35-260-A	0.035	260	4	5.8	カーブ型
G47616	AWG2-35-450	0.035	450	4	5.8	ストレート型
G47617	AWG2-35-450-A	0.035	450	4	5.8	カーブ型

注意：金属製チップを有する機器と併用しないこと。

製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL：03-6853-9470
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4426793000, india.orders@cookmedical.com
Japan: +81 368539470, info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 79621688, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
Taiwan: +866 266283500, cooktw@cookmedical.com
Thailand: +662 1688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com

