

Trust a dedicated leader
in drainage products.



Zilver 635[®]

SELF-EXPANDING BILIARY STENT




www.cookmedical.co.jp

Zilver 635[®] 経皮的胆管用ステントは、経皮的胆管ステンティングに適したラディアルフォース、アキシャルフォース、柔軟性を発揮するようデザインされています。40 cm デリバリーシステムは経皮的アプローチに適しています。Cook Medical 社では各種付属品をご用意し、様々な治療ニーズにお応えします。

A precise and durable stent designed to provide better results for your patients.

Zilver ステントは、ショートニングを抑え、またラディアルフォースや柔軟性、視認性、耐久性といったステントの重要な特性をバランスよく備えています。Zilver ステントは、スムーズなアクセスと正確なステント留置を容易にし、優れた開存¹を確保します。

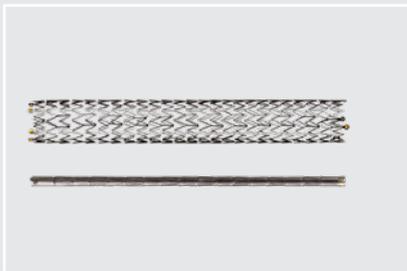


Precision

Zilver ステントは、ショートニングを抑え、正確なステント留置を容易にしました。ゴールドマーカーにより、X線透視下における高い視認性を実現しています。電解研磨による滑らかな表面加工により耐久性にも優れています。



Strength and Flexibility

Zilver の Z セル構造により、ステント全体にわたり均一なラディアルフォースを維持しながら、胆管壁への密着を実現しています。また、屈曲部でも内腔を維持したまま優れた抗キンク性を発揮します。

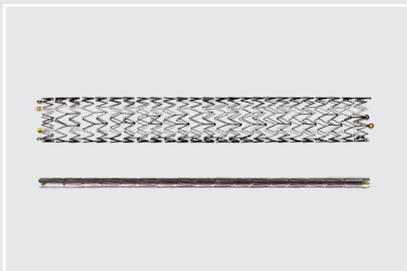

Reliability

ステントはナイチノール製の自己拡張型で、圧迫され屈曲した胆管に必要な柔軟性と適切なラディアルフォースが得られます。

1. Loew BJ, Howell DA, Sanders MK, et al. Comparative performance of uncoated, self-expanding metal biliary stents of different designs in 2 diameters: final results of an international multicenter, randomized, controlled trial. *Gastrointest Endosc.* 2009;70(3):445-453.

A flexible and efficient delivery system designed specifically for you.

Zilver 635 経皮的胆管用ステントは、胆管ドレナージを適切に行うことができる使いやすいデザインです。


- Flexor[®] 技術により、屈曲部に必要なデリバリーシステムの柔軟性、抗キンク性、プッシュビリティを実現しました。
- 柔軟な 6.0 Fr デリバリーシステム (有効長 40 cm) は、経皮的胆管用に特別にデザインされています。
- リリースしやすいハンドルと遠位端の X 線不透過性マーカーにより、目的位置へのスムーズなデリバリーと、コントロール性の高い正確な留置を実現しています。
- 先端チップの滑らかなテーパ形状によりデリバリーシステムを引き戻す際の引っかかりを防止して、容易に抜去することができます。




Flexor Technology



柔軟なシャフト

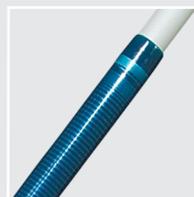

滑らかな移行部

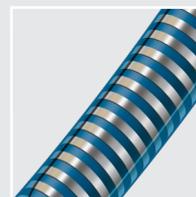


強靱なコイル状の内側




A full complement of products.

この他にも胆管ステント留置術には、胆管へのアクセスや留置部位のターゲティング、治療用のデバイスが必要です。Cook Medical 社は各種胆管ドレナージ用製品を取りそろえ、トータルで手技をサポートします。

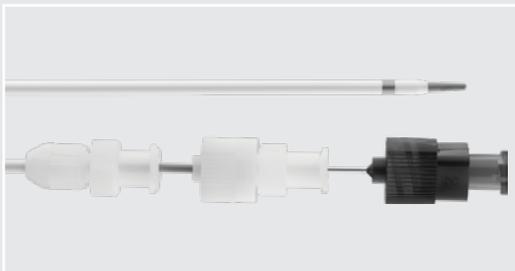


Access

Cook 独自の 2 ステップセットを含め、正確でスムーズなアクセスを目指してデザインされたニードルとイントロデューサを用いて、低侵襲的に胆管にアクセスできます。

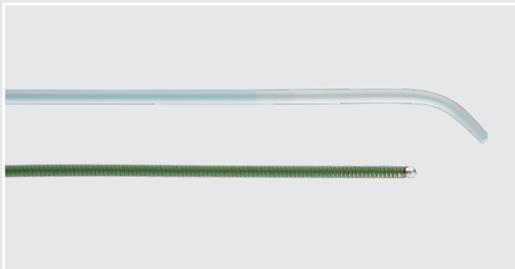

Target

多用途ガイドワイヤとシーキングカテーテルにより、正確なターゲティングと閉塞部通過が可能です。

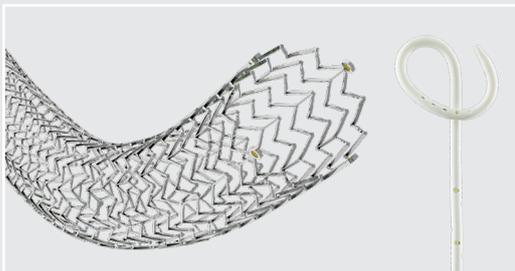

Treat

ドレナージカテーテルは非常に柔軟で抗キンク性に優れ、挿入が容易な Ultrathane® 素材を採用しております。ナイチノールステントは、ラディアルフォース、視認性に優れています。



Zilver 635[®]

SELF-EXPANDING BILIARY STENT

グローバル 製品番号	カタログ 番号	ステント径 mm	ステント長 mm
G31484	ZIB6-40-6.0-20	6	20
G31485	ZIB6-40-6.0-30		30
G31486	ZIB6-40-6.0-40		40
G32055	ZIB6-40-6.0-50		50
G31487	ZIB6-40-6.0-60		60
G36009	ZIB6-40-6.0-80		80
G31492	ZIB6-40-8.0-20	8	20
G31493	ZIB6-40-8.0-30		30
G31494	ZIB6-40-8.0-40		40
G32057	ZIB6-40-8.0-50		50
G31495	ZIB6-40-8.0-60		60
G36011	ZIB6-40-8.0-80		80
G32003	ZIB6-40-10.0-20*	10	20
G32004	ZIB6-40-10.0-30		30
G32005	ZIB6-40-10.0-40		40
G32059	ZIB6-40-10.0-50		50
G32006	ZIB6-40-10.0-60		60
G36013	ZIB6-40-10.0-80		80

デリバリーシステム：外径 6 Fr、有効長 40 cm

適合ガイドワイヤ：.035 inch

* 特別注文（非在庫）品目です。納品時期については販売担当者にご確認ください。

販売名：胆管用シルバースtent
承認番号：21500BZY00078000

ACCESSORY PRODUCTS

グローバル
製品番号

カタログ
番号

		シース 内径/外径 Fr	ニードル ゲージ/長 cm	ガイドワイヤ タイプ
胆管アクセスセット				
G07951	PTCD-K-1-HIRATA-102593	4.0/6.0	21/15	ステンレス
G07953	PTCD-K-2-HIRATA-102593		21/20	

販売名: PTCD セット
承認番号: 16100BZY00608000

		カテーテル Fr	適合ガイド ワイヤ径 inch	カテーテル 側孔	シース 内径/外径 Fr	ニードル ゲージ/長 cm
PTCD (2ステップ) セット (側胸アプローチ用)						
G07939	PTCD-R2-0-HIRATA-102193	7.2	.038	5	4.0/6.0	21/20
ビッグテール型 PTCD (2ステップ) セット (側胸アプローチ用)						
G07945	PTCD-R2-PIG-HRT-102193	7.2	.038	5	4.0/6.0	21/20

販売名: PTCD セット
承認番号: 16100BZY00608000

		カテーテル Fr	適合ガイド ワイヤ径 inch	カテーテル 全長 cm	側孔	トロッカー スタイレット ニードル ゲージ
ウルトラサン ドーソンミュラードレナージセット						
G27298	CLDM-8.5-MH	8.5	.038	25	5	18
G30027	CLDM-10.2-MH	10.2				
G30028	CLDM-12.0-MH	12.0				

販売名: ウルトラサンドレナージカテーテル
承認番号: 20500BZY00349000

		カテーテル Fr	適合ガイド ワイヤ径 inch	カテーテル 全長 cm	チップ 形状
トルコン NB 血管造影カテーテル (シーキングカテーテル)					
G06749	HNB5.0-38-40-P-NS-KMP	5.0	.038	40	KMP
G27789	HNB7.0-38-35-P-NS-KMP	7.0		35	

販売名: ナイロンカテーテル
承認番号: 20300BZY00122000

		直径 inch	全長 cm	チップ 形状
AMPLATZ 型エクストラスティッフガイドワイヤ				
G06874	THSF-38-80-AES-SGH	.038	80	ストレート

販売名: クックガイドワイヤー (ヘパリンなし)
承認番号: 21500BZY00336000

製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL: 03-6853-9470
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4426793000, india.orders@cookmedical.com
Japan: +81 368539470, info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 79621688, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
Taiwan: +866 266283500, cooktwn@cookmedical.com
Thailand: +662 1688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com

