




Retrieve with ease.

Indy OTW™ VASCULAR RETRIEVER

Indy OTW バスキュラー リトリーバーは、ガイドワイヤ、カテーテルやそれら断片の回収を実現します。Indy OTW バスキュラー リトリーバーは、4本のナイチノールとプラチナ製のワイヤループからなるスネア及び Flexor® シースで構成されています。



www.cookmedical.co.jp

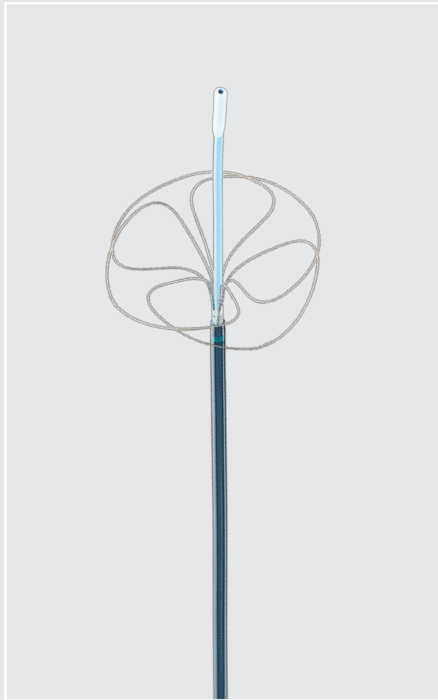

Indy OTW™

VASCULAR RETRIEVER

オーバー・ザ・ワイヤー

オーバー・ザ・ワイヤー式の Indy OTW バスキュラー リトリバーは、0.035 inch ガイドワイヤーに適合するため、安定的な操作とトラッカビリティを実現し、スネアの操作を容易にします。

4ループスネア

4本のワイヤループからなるループスネア型の Indy OTW バスキュラー リトリバーは、スネアが40mmまで展開し、ワイヤループ同士が重なり合います。

Flexor® シース

耐キンク性のシースは、柔軟性に優れ、よりスムーズに血管内を通過することが可能です。X線不透過マーカがシースの遠位端の位置を透視下で示します。


展開範囲

Indy OTW バスキュラー リトリバーは異なる太さの血管に合わせて、その直径全体に展開します。シースチューブ長は、55cm及び100cmから選択可能なため、さまざまな目的の部位に適用することができます。

グローバル 製品番号	カタログ 番号	シースチューブ 外径 Fr	適合ガイドワイヤ径 inch	シース チューブ長 cm	スネア径 mm
G51835	INDY-8.0-35-55-40	8.0	0.035	55	40
G51836	INDY-8.0-35-100-40			100	

品番説明

INDY-8.0-35-55-40

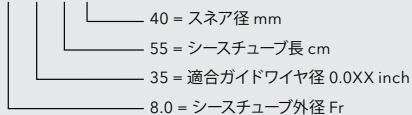

販売名: COOK Indy OTW バスキュラー リトリバー
承認番号: 22500BZX00360000

製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL: 03-6853-9470
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4426793000, india.orders@cookmedical.com
Japan: +81 368539470, info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 79621688, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
Taiwan: +866 266283500, cooktw@cookmedical.com
Thailand: +662 1688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com

