


# Obtain core biopsies even in the most difficult anatomical positions.

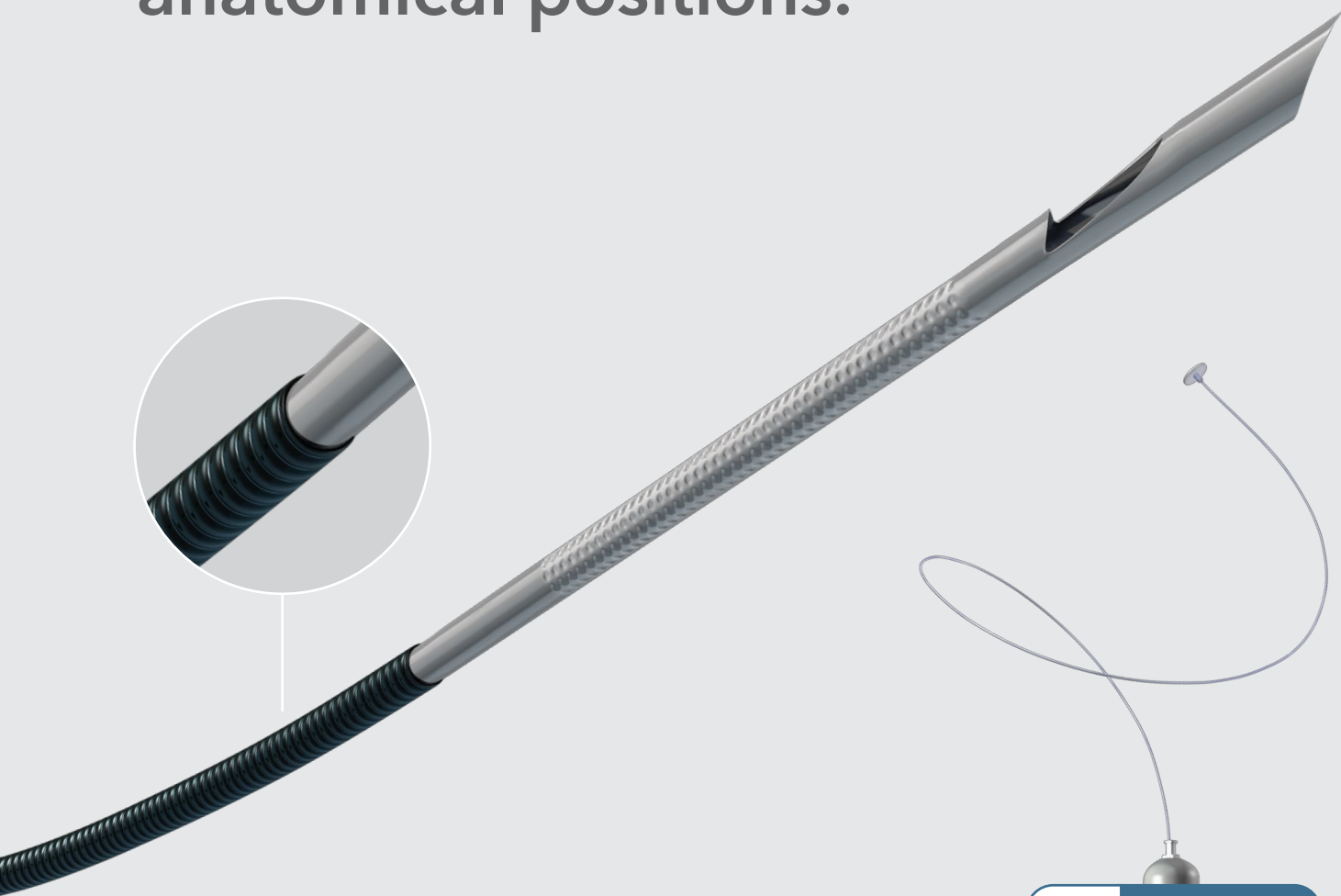

## EchoTip ProCore<sup>®</sup>

HD ULTRASOUND BIOPSY NEEDLE

EchoTip ProCoreは、少ない穿刺回数で組織を採取することに貢献できます。\*  
このたび、新たにラインナップされた20ゲージニードルは、柔軟性に優れたコイル  
スプリング式シースを採用しています。さらに、ReCoil™ Styletは自動で巻戻るため  
スタイレット全体の取扱いがしやすくなり、汚染リスクの抑制にも期待できます。



Cook Medical—Leading the way in EUS.

FEATURING

ReCoil™  
Stylet



\*Data on file at Cook Medical.

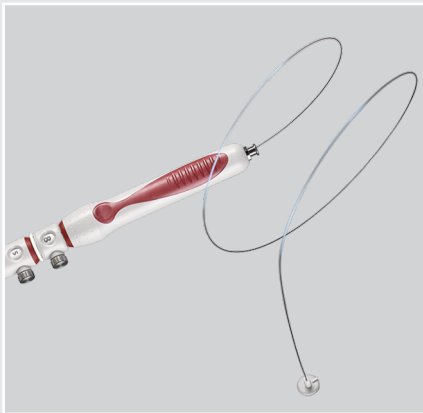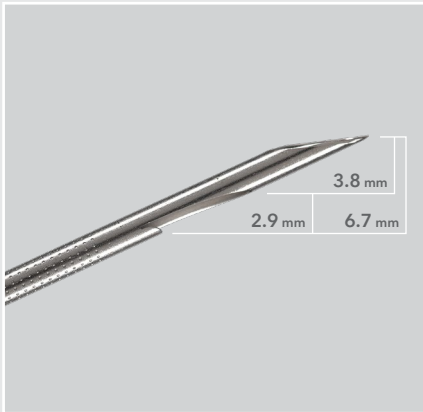

## EchoTip ProCore®

HD ULTRASOUND BIOPSY NEEDLE

消化管内やこれらに隣接する粘膜下病変、縦隔腫瘍、リンパ節、および腹腔内腫瘍の超音波内視鏡下の微細針生検 (FNB) に使用します。

滅菌済み、単回使用のディスポーザブル製品です。

- 容易なコアサンプル採取が期待できる大口径の20ゲージニードル
- 曲がりの強い角度でも容易なニードル挿入が期待できる、優れた柔軟性を備えたコイルスプリング式シースデザイン
- ニードル内に組織を採取する新たなコアトラップ形状 (検体採取空間形状)
- ディンプルパターンにより、超音波画像上でのニードルの優れた視認性を実現
- コア生検に適したニードル先端のMenghini形状
- 自動で巻き取るReCoil™ Styletにより汚染領域での不必要な接触を低減
- 人間工学的に握りやすいハンドル
- シース長の調整が可能なシース一体型アジャスタ
- 深部での生検を実現する伸長可能なニードル (最長8cm)

グローバル 製品番号	カタログ 番号	ニードル サイズ ゲージ	ニードル 伸長可能範囲 cm	カテーテル サイズ Fr	最小 適合鉗子 チャンネル mm
G34785	ECHO-HD-3-20-C	20	0~8	7.95	3.7

カテーテル長は調整可能。10 cc真空ロックシリンジ (5 ccに調整可能) が含まれます。

販売名 : COOK超音波内視鏡下生検針EchoTip ProCore  
認証番号 : 227AABZX00120000

### 製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社  
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1  
中野セントラルパークイースト  
TEL: 03-6853-9470  
[cookmedical.co.jp](http://cookmedical.co.jp)

### Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, [cau.custserv@cookmedical.com](mailto:cau.custserv@cookmedical.com)  
China: +86 2154519599, [chinacssupport@cookmedical.com](mailto:chinacssupport@cookmedical.com)  
Hong Kong: +852 34721688, [cs.cahk@cookmedical.com](mailto:cs.cahk@cookmedical.com)  
India: +91 4426793000, [india.orders@cookmedical.com](mailto:india.orders@cookmedical.com)  
Japan: +81 368539470, [info-japan@cookmedical.com](mailto:info-japan@cookmedical.com)  
Korea: +822 62923500, [kr.orders@cookmedical.com](mailto:kr.orders@cookmedical.com)  
Malaysia: +603 79621688, [cs.malaysia@cookmedical.com](mailto:cs.malaysia@cookmedical.com)  
Singapore: +65 63207678, [cooksea.cs@cookmedical.com](mailto:cooksea.cs@cookmedical.com)  
Taiwan: +866 266283500, [cooktw@cookmedical.com](mailto:cooktw@cookmedical.com)  
Thailand: +662 1688630, [th.orders@cookmedical.com](mailto:th.orders@cookmedical.com)  
SADC: +65 63207600, [sadc\\_cs@cookmedical.com](mailto:sadc_cs@cookmedical.com)  
[cookmedical.com](http://cookmedical.com)

