

# Ramp up your access capabilities.




## Haber RAMP™

CATHETER

0.035 inch ガイドワイヤを 3 本まで同時に挿入できる Haber RAMP カテーテルは、  
膵胆管の選択的なアクセスを容易にします。同時に 2 本のガイドワイヤを挿入したまま、  
3 本目のルーメンから造影剤を注入することもできます。



[www.cookmedical.co.jp](http://www.cookmedical.co.jp)

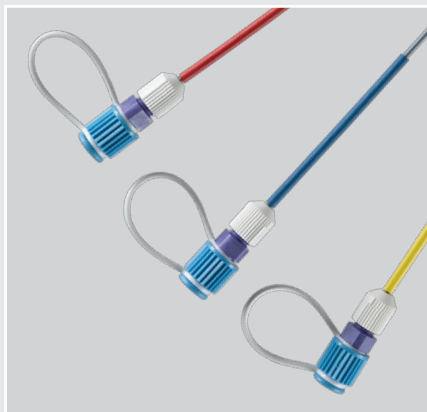

## Haber RAMP™

CATHETER

経内視鏡的に膵胆管へ挿入し造影するために使用します。

- トリプルルーメン構造により、ガイドワイヤを目標の膵胆管にアクセスしたまま造影剤を注入することが可能
- 0.035 inch ガイドワイヤを3本同時に留置が可能
- カテーテル先端のX線不透過性マーカにより、X線透視下での視認性を確保

| グローバル<br>製品番号 | カタログ<br>番号 | カテーテル<br>径<br>Fr | カテーテル<br>先端径<br>Fr | 先端<br>形状 | カテーテル<br>全長<br>cm | ガイドワイヤ<br>径<br>inch | 最小<br>適合鉗子<br>チャンネル<br>mm |
|---------------|------------|------------------|--------------------|----------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| G25194        | HRC-1      | 8                | 6                  | テーパ加工    | 200               | .035                | 3.2                       |

販売名: COOK ERCPカテーテル  
認証番号: 226AABZX00188000

### 製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社  
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1  
中野セントラルパークイースト  
TEL: 03-6853-9470  
[cookmedical.co.jp](http://cookmedical.co.jp)

### Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, [cau.custserv@cookmedical.com](mailto:cau.custserv@cookmedical.com)  
China: +86 2154519599, [chinacssupport@cookmedical.com](mailto:chinacssupport@cookmedical.com)  
Hong Kong: +852 34721688, [cs.cahk@cookmedical.com](mailto:cs.cahk@cookmedical.com)  
India: +91 4426793000, [india.orders@cookmedical.com](mailto:india.orders@cookmedical.com)  
Japan: +81 368539470, [info-japan@cookmedical.com](mailto:info-japan@cookmedical.com)  
Korea: +822 62923500, [kr.orders@cookmedical.com](mailto:kr.orders@cookmedical.com)  
Malaysia: +603 79621688, [cs.malaysia@cookmedical.com](mailto:cs.malaysia@cookmedical.com)  
Singapore: +65 63207678, [cooksea.cs@cookmedical.com](mailto:cooksea.cs@cookmedical.com)  
Taiwan: +866 266283500, [cooktw@cookmedical.com](mailto:cooktw@cookmedical.com)  
Thailand: +662 1688630, [th.orders@cookmedical.com](mailto:th.orders@cookmedical.com)  
SADC: +65 63207600, [sadc\\_cs@cookmedical.com](mailto:sadc_cs@cookmedical.com)  
[cookmedical.com](http://cookmedical.com)

