


# Experience ultra-smooth insertion with our Silhouette® Transitionless™ tip.



10 cm Silhouette Transitionless  
イントロデューサ

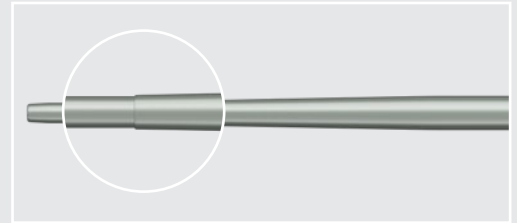

40 cm プラチナ製チップ  
ナイチノールワイヤ



21G、7 cm EchoTip® ニードル

## Micropuncture® INTRODUCER SET

### Fewer Complications


Micropuncture の使用により、アクセス部位での出血性合併症の発生率は、11.7 % から 2.6 % に低下しました<sup>1</sup>。

### Smooth Entry

Silhouette Transitionless イントロデューサは段差が少ないので、血管への挿入がスムーズです。

### High Visibility

- シャープな 21G ニードルに、超音波透視下での視認性を高める EchoTip® テクノロジーを採用しています。
- サポート力のあるナイチノール製ワイヤを採用し、先端部はプラチナ製チップなので、X 線透視下での視認性に優れています。

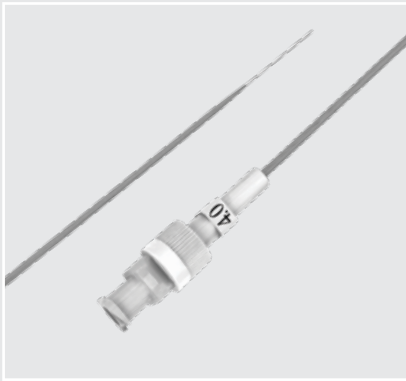

## Micropuncture® INTRODUCER SET

Micropuncture イントロデューサセットは、21G ニードルでの血管アクセスが可能で、イントロデューサ挿入後は.035 または .038 inch ガイドワイヤをご利用いただけます。

スタンダードとスティッフの2タイプをご用意しています。スティッフタイプは通常のシースでは挿入が困難な症例にご使用ください。

グローバル 製品番号	カタログ番号	イントロデューサ 外筒 外径/内径 Fr	イントロデューサ 外筒 長さ cm	イントロデューサ 内筒 タイプ	ガイドワイヤ 径/長さ inch/cm	ニードル ゲージ/cm
G47944	MPIS-401-NT-U-SST	4.0/2.9	10	スタンダード型	.018/40	21/7
G48004	MPIS-401-10.0-SC-NT-U-SST	4.0/2.9	10	スティッフ型	.018/40	21/7

製品名：マイクロパンチャーイントロデューサーセット  
販売名：シースセット  
承認番号：21500BZY00337000

1 Shah H, Bansal A, Srinivasan V, et al. Vascular access site bleeding complications with Micropuncture needle in patients undergoing cardiac catheterization: a comparison with conventional Cook needle. Poster presented at: The Society for Cardiovascular Angiography and Interventions 29th Annual Scientific Sessions; May 10-13, 2006; Chicago, IL. Abstract D-45.

### 製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社  
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1  
中野セントラルパークイースト  
TEL: 03-6853-9470  
[cookmedical.co.jp](http://cookmedical.co.jp)

### Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, [cau.custserv@cookmedical.com](mailto:cau.custserv@cookmedical.com)  
China: +86 2154519599, [chinacssupport@cookmedical.com](mailto:chinacssupport@cookmedical.com)  
Hong Kong: +852 34721688, [cs.cahk@cookmedical.com](mailto:cs.cahk@cookmedical.com)  
India: +91 4426793000, [india.orders@cookmedical.com](mailto:india.orders@cookmedical.com)  
Japan: +81 368539470, [info-japan@cookmedical.com](mailto:info-japan@cookmedical.com)  
Korea: +822 62923500, [kr.orders@cookmedical.com](mailto:kr.orders@cookmedical.com)  
Malaysia: +603 79621688, [cs.malaysia@cookmedical.com](mailto:cs.malaysia@cookmedical.com)  
Singapore: +65 63207678, [cooksea.cs@cookmedical.com](mailto:cooksea.cs@cookmedical.com)  
Taiwan: +866 266283500, [cooktwn@cookmedical.com](mailto:cooktwn@cookmedical.com)  
Thailand: +662 1688630, [th.orders@cookmedical.com](mailto:th.orders@cookmedical.com)  
SADC: +65 63207600, [sadc\\_cs@cookmedical.com](mailto:sadc_cs@cookmedical.com)  
[cookmedical.com](http://cookmedical.com)

