


Reach and treat distal lesions
with the rapid-exchange
balloon engineered
for the periphery.

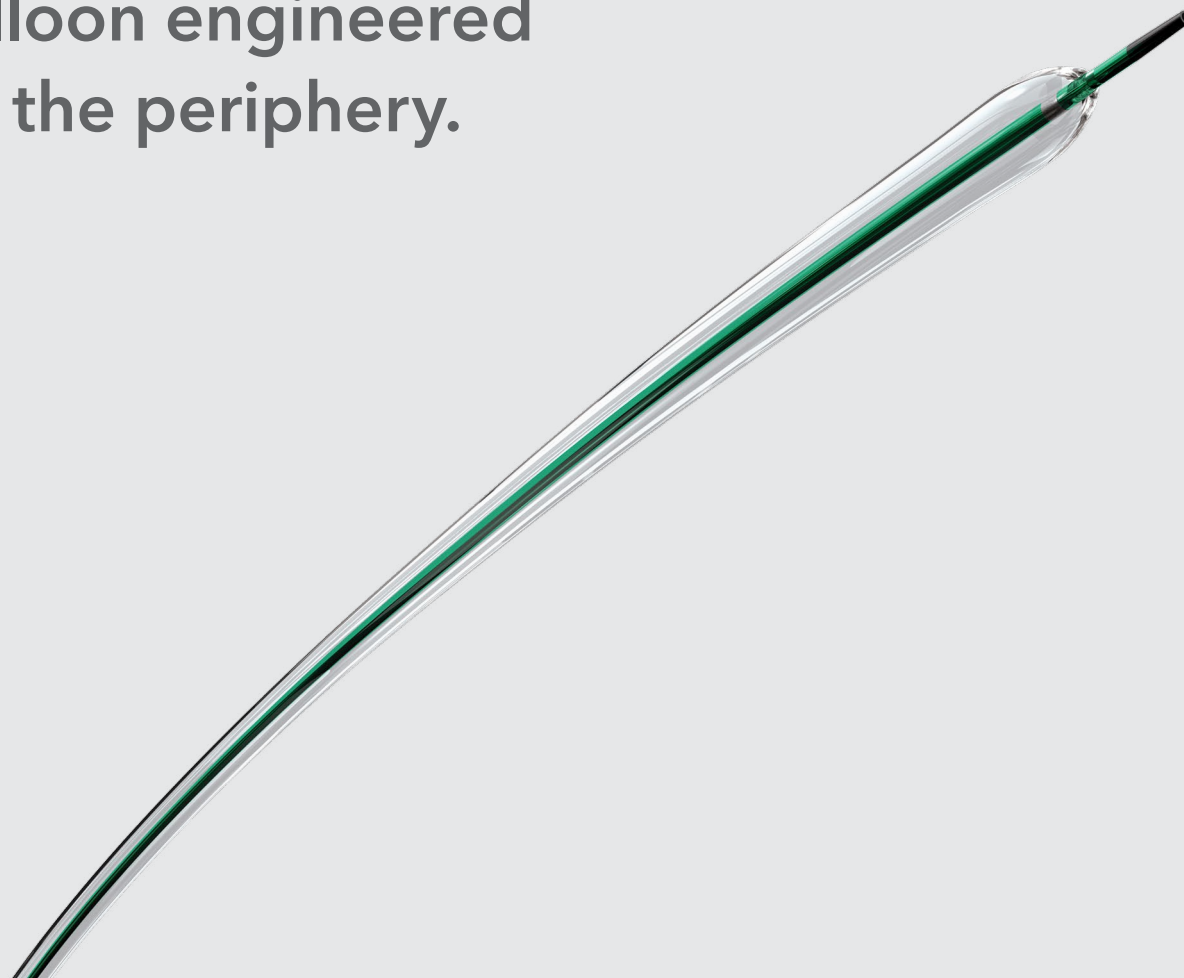

Advance[®] 14LP

LOW PROFILE PTA BALLOON DILATATION CATHETER

Exclusive peripheral shaft

有効長 165 cm のコイルワイヤシャフトは柔軟性と抗キンク性、そして優れたプッシュビリティとトラッカビリティを兼ね備えています。

Peripheral exchange

独自の 50 cm Peripheral エクスチェンジポートにより、RXでありながらも優れたプッシュビリティを実現しています。

Long, low-compliant balloons

全てのバルーン長 (20 ~ 200 mm) が 4 Fr シースに適合します。



Peripheral design makes
the most challenging infrapopliteal
procedures possible.

Advance® 14LP は、膝窩動脈下の疾患に適した
独自のコイルワイヤシャフトが特長です。

EXCLUSIVE PERIPHERAL SHAFT

有効長165 cmのコイルワイヤシャフト

- ・優れたトラッカビリティとプッシュビリティが、より遠位部での操作を可能にします。
- ・柔軟性と抗キンク性により、下肢の蛇行血管での通過も容易にします。

Low crossing profile

- ・スムーズチップトランジション、そして優れた親水性コーティングにより、少ない抵抗感で病変部へ進めることができます。

PERIPHERAL EXCHANGE SYSTEM

独自の 50 cm エクスチェンジポート

- ・クロスオーバーの手技においても、膝窩動脈下インターベンションに求められるプッシュビリティをサポートします。
- ・速やかなデバイス交換が可能となり、手技時間の短縮、放射線被ばく量の軽減に貢献します。


Shuttle® Tibial Infrapopliteal Access System に適合

- ・膝窩動脈下用としてデザインされたShuttle Tibial シースを併用することで、よりプッシュビリティが向上します。(販売名:シースセット 承認番号:21500BZY00337000)

LONG, LOW-COMPLIANT BALLOONS

バルーン長は 20 mm ~ 200 mm から選択可能

- ・長区域病変においても、少ない使用回数での手技が可能です。
- ・デフレーション後も 4 Fr シースに適合します。

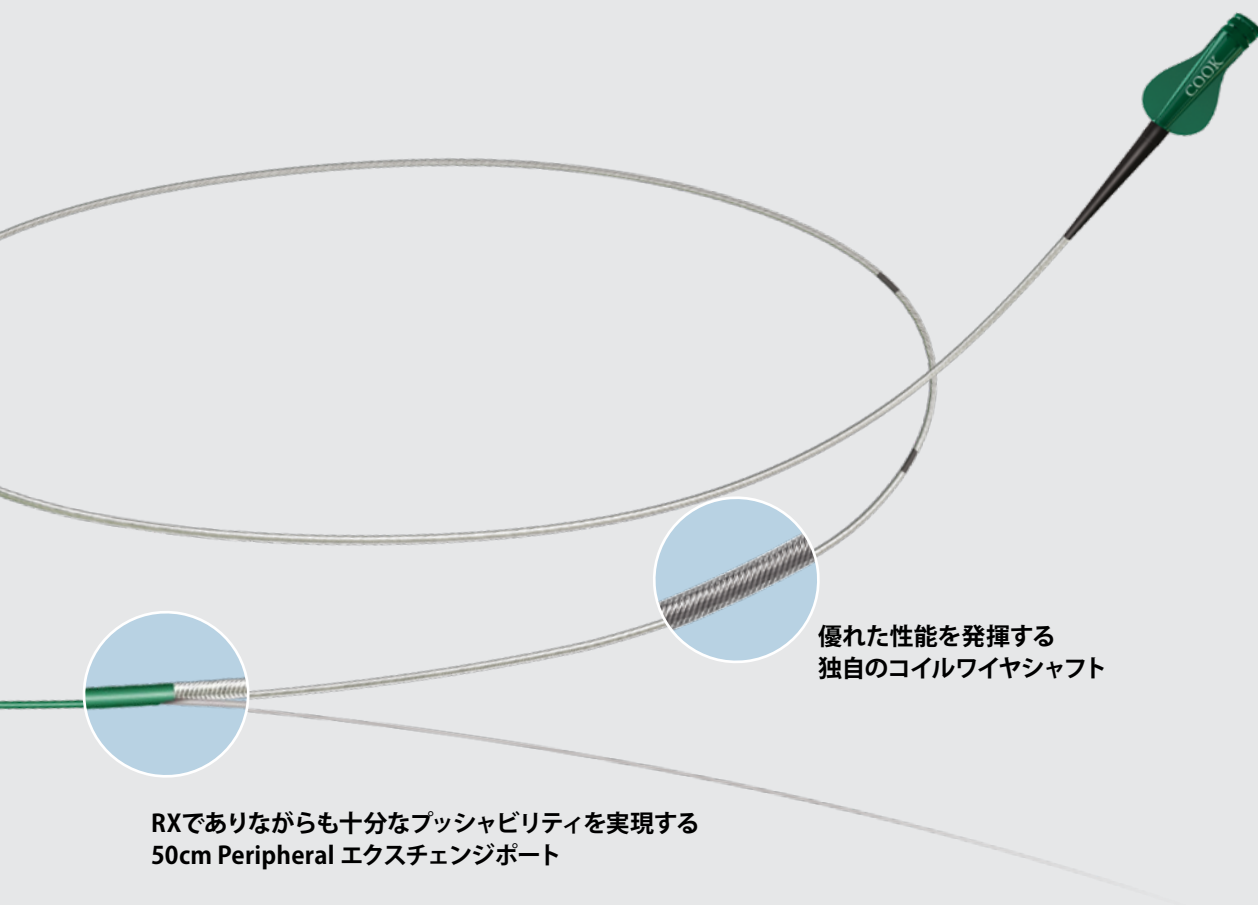

優れた性能を発揮する
独自のコイルワイヤシャフト

RXでありながらも十分なプッシュビリティを実現する
50cm Peripheral エクスチェンジポート

Advance® 14LP

LOW PROFILE PTA BALLOON DILATATION CATHETER

グローバル 製品番号	カタログ番号	拡張 バルーン径 mm	バルーン長 cm	推奨 適合シース Fr	Nominal Pressure atm	Rated Burst Pressure atm
---------------	--------	-------------------	-------------	-------------------	----------------------------	--------------------------------

165 cm カテーテル有効長+ストレインリリーフ部

G50313	PTAX4-14-170-2-2	2	2	4	8	16
G50314	PTAX4-14-170-2-4		4			
G50317	PTAX4-14-170-2-12		12			
G50319	PTAX4-14-170-2-20		20			
G50320	PTAX4-14-170-2.5-2	2.5	2			
G50321	PTAX4-14-170-2.5-4		4			
G50324	PTAX4-14-170-2.5-12		12			
G50326	PTAX4-14-170-2.5-20		20			
G50327	PTAX4-14-170-3-2	3	2			
G50328	PTAX4-14-170-3-4		4			
G50331	PTAX4-14-170-3-12		12			
G50333	PTAX4-14-170-3-20		20			
G50334	PTAX4-14-170-4-2	4	2			
G50335	PTAX4-14-170-4-4		4			
G50338	PTAX4-14-170-4-12		12			

0.014 インチ径以下のガイドワイヤに適合

製品名: Advance LP PTA/バルーンカテーテル
販売名: Advance LP PTA/バルーン拡張式カテーテル
承認番号: 22500BZX00076000

製品名: Advance LP2 PTA/バルーンカテーテル
販売名: Advance LP2 PTA/バルーン拡張式カテーテル
承認番号: 22700BZX00184000

品番説明

PTAX4-14-170-2-2

- 2 = バルーン長 (cm)
- 2 = 拡張バルーン径 (mm)
- 170 = カテーテル有効長 (165cm) + ストレインリリーフ部 (5cm)
- 14 = 適合ガイドワイヤ (.0XX inch)
- 4 = 適合シース (Fr)

製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL: 03-6853-9470
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4426793000, india.orders@cookmedical.com
Japan: +81 368539470, info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 79621688, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedice.com
Taiwan: +866 266283500, cooktw@cookmedical.com
Thailand: +662 1688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com

