



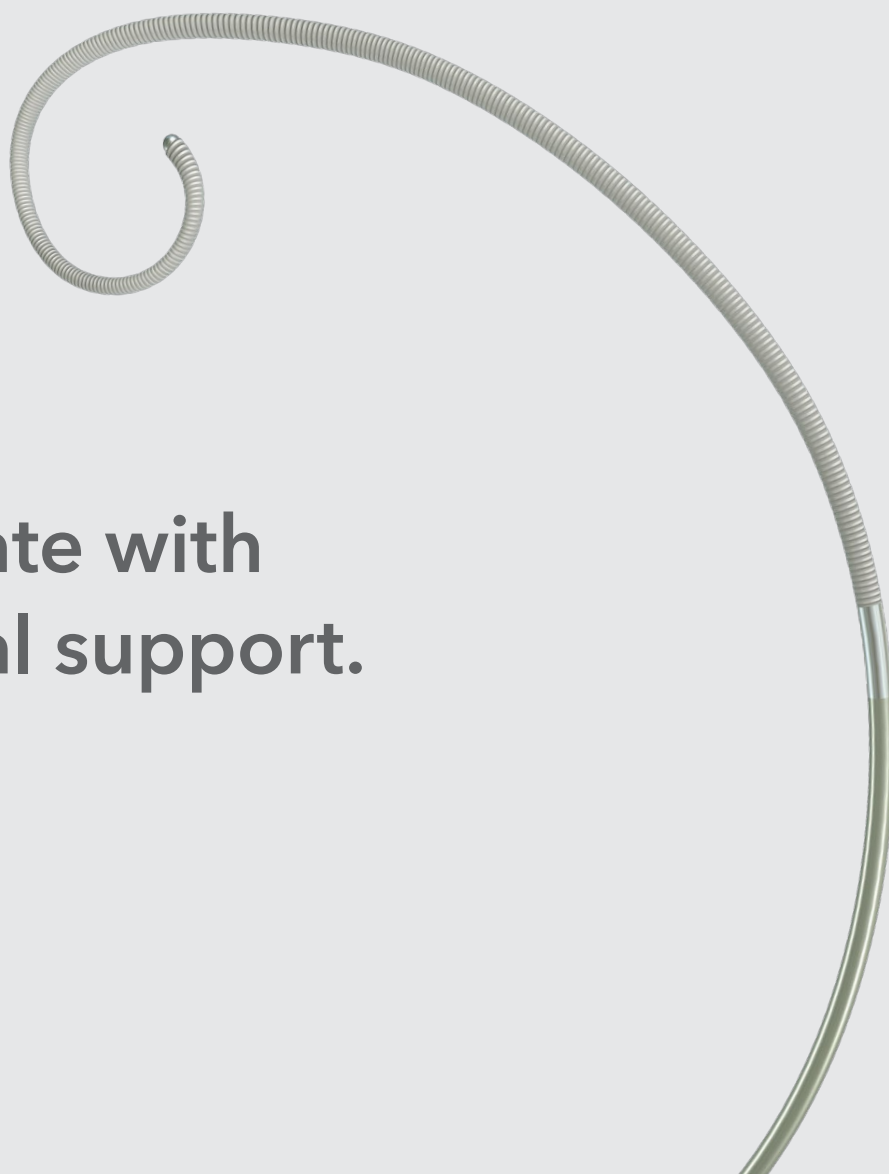

Navigate with optimal support.

Lunderquist®
EXTRA-STIFF WIRE GUIDE

Lunderquist® エクストラスティッフガイドワイヤは、蛇行血管をサポートしながらスムーズに血管内をナビゲートします。Lunderquist は大動脈ステントグラフト治療に適したガイドワイヤです。

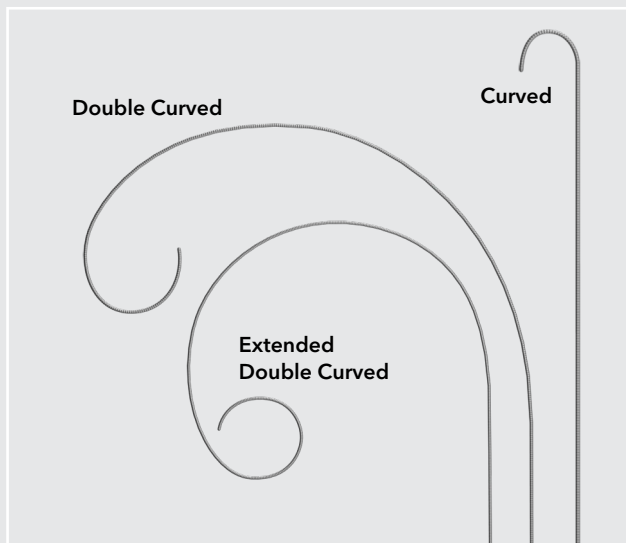

Lunderquist®

EXTRA-STIFF WIRE GUIDE

Support

PTFE コーティングを施したステンレス製ガイドワイヤは血管をサポートし、表面摩擦を低減させます。

Safety

剛性マンドリルの遠位部がテーパ状で、柔軟性のある設計となっているため、血管損傷の軽減が期待されます。X 線不透過性のゴールド製インナーコイルは高い視認性によりチップ位置の正確な特定に役立ちます。

Compatibility

柔軟なカーブ型チップは、様々な解剖学的構造に適合するよう特別にデザインされています。

グローバル 製品番号	カタログ番号	径 inch	長さ cm	フレキシブルチップ (先端部) の長さ cm	大 / 小カーブの 半径 mm	コイルの 長さ cm
Curved PTFE コーティングステンレススチール						
G45353	TSCMG-35-260-7-LES	.035	260	4	7.5	15
Double Curved PTFE コーティングステンレススチール						
G45208	TSCMG-35-260-LESDC	.035	260	4	75/15	15
G45408	TSCMG-35-300-LESDC	.035	300	4	75/15	15
Extended Double Curved PTFE コーティングステンレススチール						
G53967	TSCMG-35-260-E-LESDC	.035	260	4	55/15	15
G53971	TSCMG-35-300-E-LESDC	.035	300	4	55/15	15

販売名：COOK Lunderquist エクストラスティッフガイドワイヤ
承認番号：22400BZX00511000

製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL：03-6853-9470
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4426793000, india.orders@cookmedical.com
Japan: +81 368539470, info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 79621688, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
Taiwan: +866 266283500, cooktw@cookmedical.com
Thailand: +662 1688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com

