


耐久性を追及する治療を
より容易に
より多くの患者さまに



より多くの患者さまに
TEVAR を選択肢の
一つとして提供

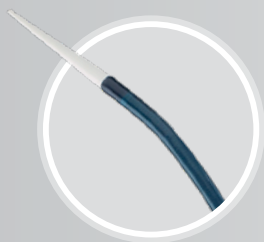

シンプルに操作できる
デリバリーシステム



治療の耐久性向上を
追求するための設計

Zenith Alpha™
THORACIC ENDOVASCULAR GRAFT



cookmedical.co.jp

Zenith Alpha™

THORACIC ENDOVASCULAR GRAFT

TREAT MORE PATIENTS

より多くの患者さまにTEVARを 選択肢の一つとして提供

さまざまな特徴を組み合わせた結果、血管アクセスが向上し、より多くの患者さまに血管内修復を選択肢の一つとして提供します。



グラフト径

24-30 mm

32-38 mm

40-46 mm

イントロデューサシース径

ロープロファイルの胸部デバイスにより
血管アクセスが向上します。

内径 16 Fr

内径 18 Fr

内径 20 Fr

親水性コーティングを施した
Flexor® シースは、腸骨領域
でのデバイスの追従性をサ
ポートします。


Zenith Alpha™

THORACIC ENDOVASCULAR GRAFT

SIMPLIFIED

シンプルに操作できるデリバリーシステム

Zenith Alpha 胸部エンドバスキュラーグラフトは、人間工学に基づいた新しいハンドルを有し、正確性とコントロール性を損なうことなく、展開をよりシンプルにします。

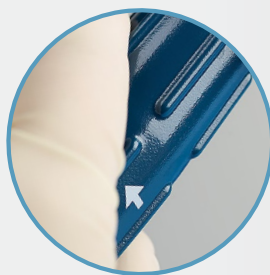

青色の回転ハンドルが展開をさらに容易にし、リリースワイヤを回収する必要はありません。




黒色と灰色のセーフティロックは意図せずハンドルが回転しグラフトがデリバリーシステムから展開されないようにするメカニズムです。




スライド式黒色グリッパにより、シースを引き戻しながらグラフトを展開する際のコントロールを自在にします。

シンプルなステップ

1 シースを引き戻す

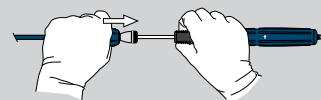

2 ロックを解除する

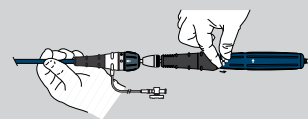

3 回転させる



Zenith Alpha™


THORACIC ENDOVASCULAR GRAFT

DURABILITY

治療の耐久性向上を 追求するための設計



プロキシマルからディスタルシーリングにかけて、Zenith Alpha 胸部エンドバスキュラーグラフトは耐久性のある治療を可能にするよう設計されています。

プレカーブドカニューラが弓部
へのコンフォーマビリティを向
上します。

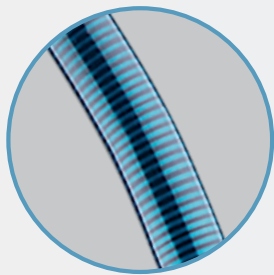

Active fixationでデバイス
を健全なシーリングゾーン
へ固定します。

ナイチノール製 Z ステ
ントと緻密に編まれた
繊維は患者の解剖に
適合し、エンドリーク
を予防します。

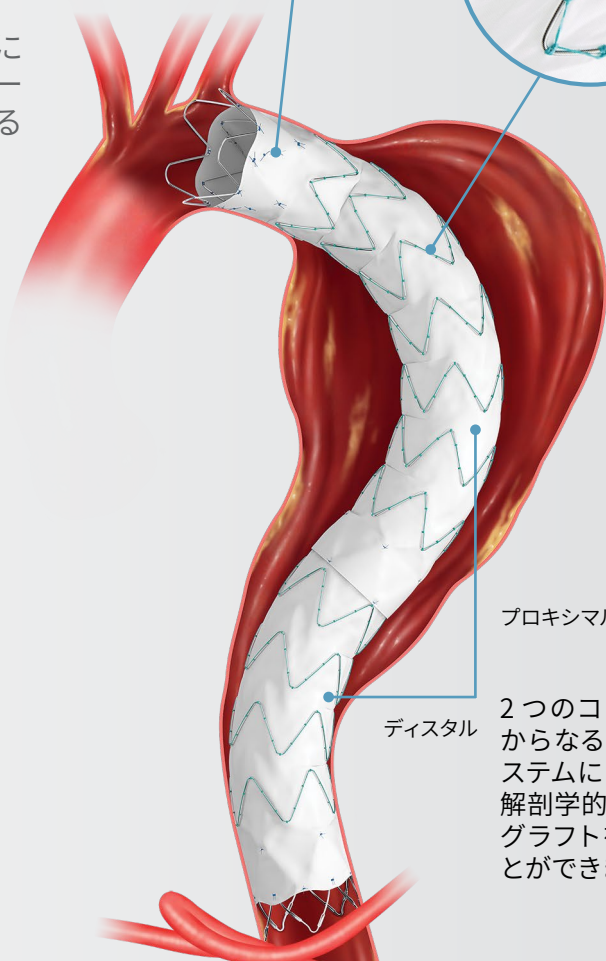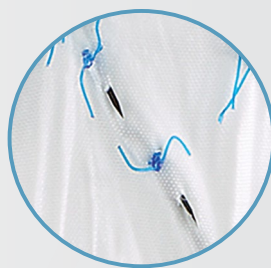

プロキシマル

ディスタル

2つのコンポーネン
トからなるモジュラ
ーシステムにより、患
者の解剖学的条件にあ
ったグラフトを選択す
ることができます。

製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL: 03-6853-9470
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4426793000, india.orders@cookmedical.com
Japan: +81 368539470, info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 79621688, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
Taiwan: +866 266283500, cooktw@cookmedical.com
Thailand: +662 1688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com

