

有效控制，减少压力。



EVOLUTION[®] Esophageal^{1,2}


全覆膜食道支架系统 / 食道支架系统



产品名称1: 食道支架系统 Esophageal Stent System


产品名称2: 全覆膜食道支架系统 Evolution Esophageal Stent System-Fully Covered

有效控制，减少压力。

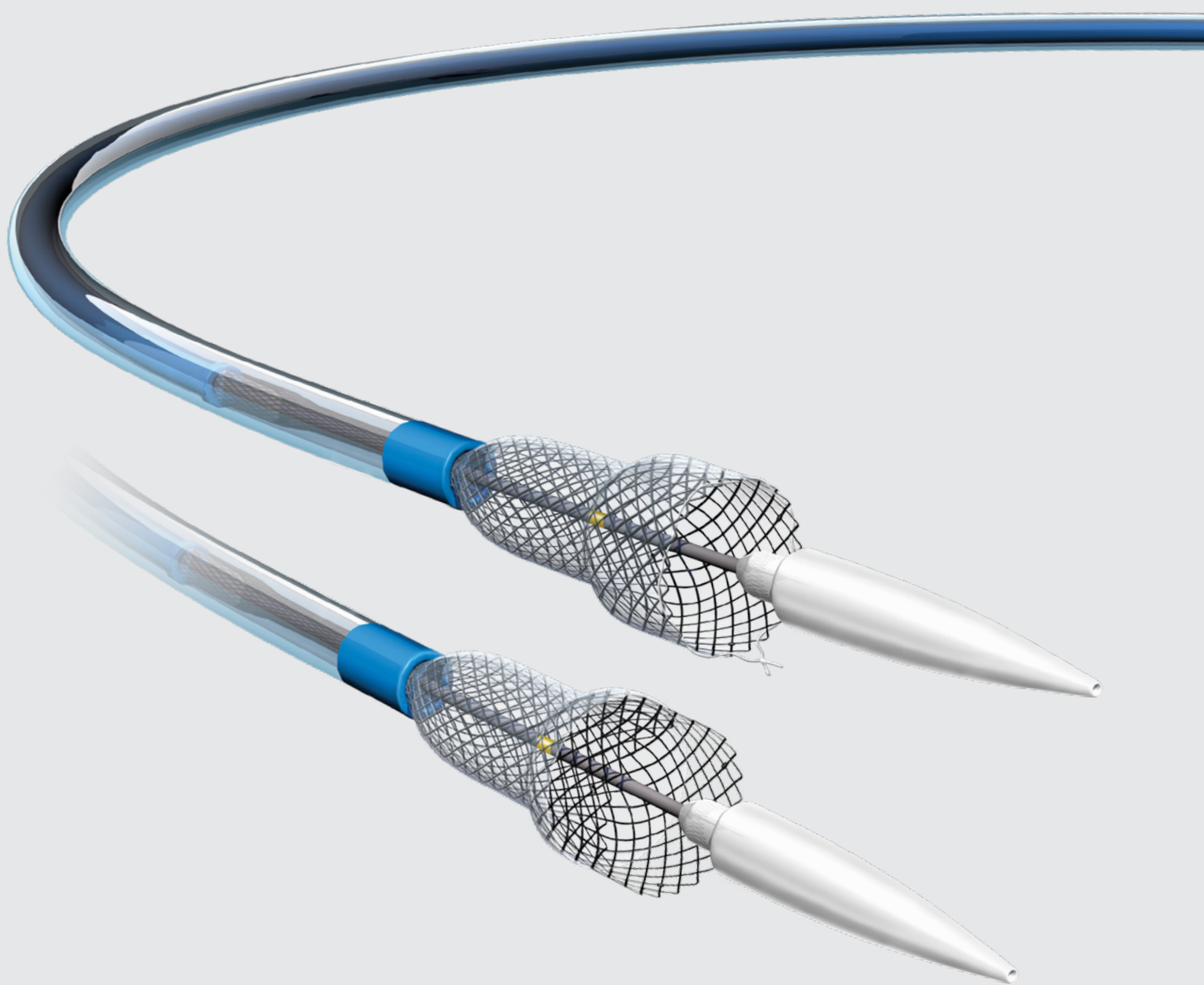

双层覆硅胶膜的设计

覆硅胶膜的Evolution的设计有近端和远端的喇叭口。部分覆膜支架近端的套索以及全覆膜支架近端、远端均有带色标的套索，便于支架释放后立即调整支架位置。

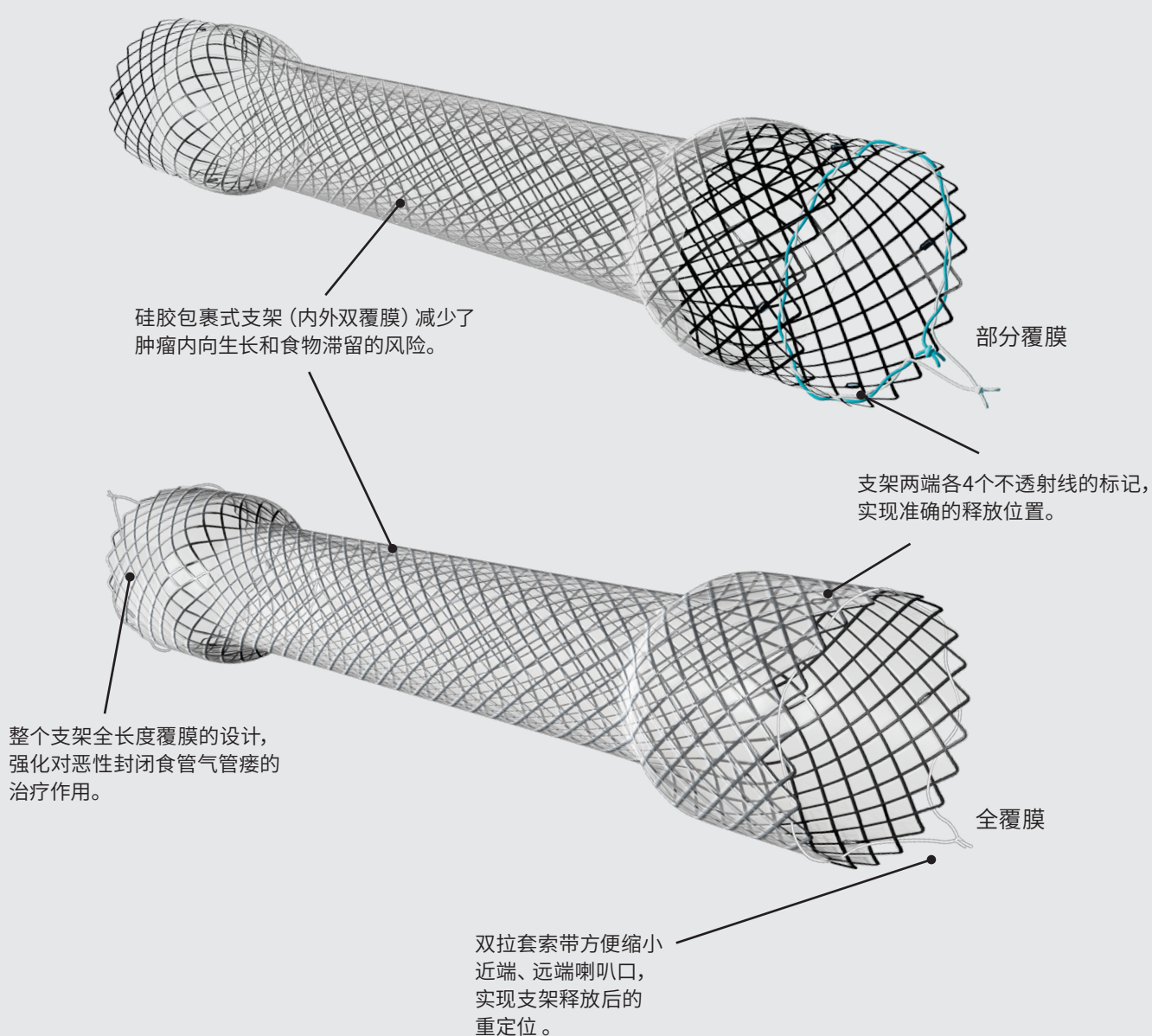


控制性

每一次扳动扳机都能够给予支架准确的释放或回收操控。简单的按钮式方向调节方便您轻易切换支架运动方向。手柄上还有一个“不可回退点”标记提示您支架到何位置就不能再做回收操作。



覆膜技术

为了给您提供较多的治疗选择, Evolution食道支架有部分覆膜和全覆膜型号。
得益于增加术者信心的可控制释放系统, 所有这些型号支架均可以顺畅自如地释放。

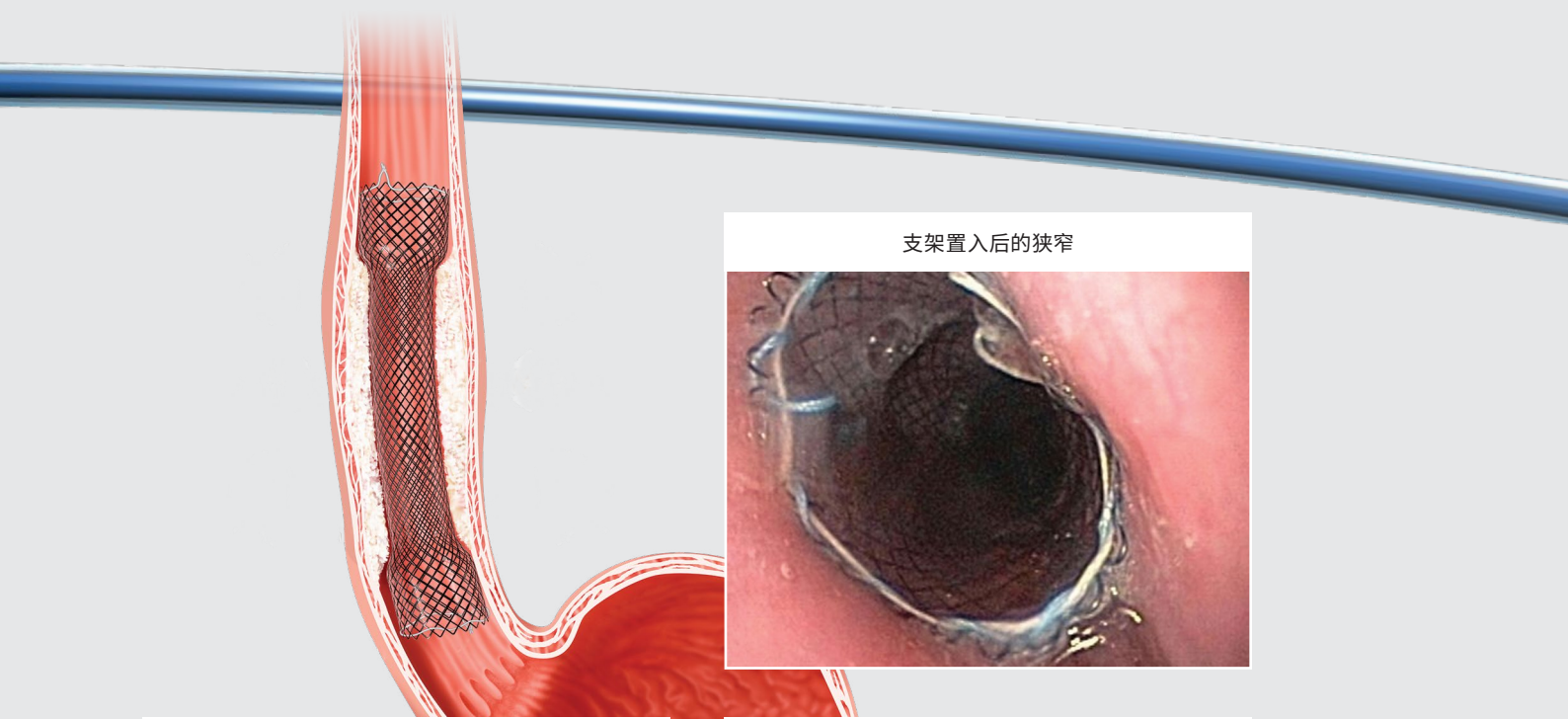

支架置入后的狭窄



部分释放的支架



释放完成后支架的即时位置



产品说明

全覆膜

用于维持恶性肿瘤性食道狭窄的通畅性及 / 或封闭气管食道瘘。
产品出厂时已经灭菌处理 - 仅供一次性使用。

订货号码	产品型号	支架体 直径 mm	两端 直径 mm	支架 长度 cm
G51181	EVO-FC-18-23-8-E	18	23	8
G51182	EVO-FC-18-23-10-E	18	23	10
G51183	EVO-FC-18-23-12-E	18	23	12
G52225	EVO-FC-20-25-8-E	20	25	8
G52227	EVO-FC-20-25-10-E	20	25	10
G52226	EVO-FC-20-25-12-E	20	25	12

部分覆膜

用于维持恶性食管狭窄通畅性及 / 或封闭气管食管瘘。
产品出厂时已经灭菌处理 - 仅供一次性使用。

订货号码	产品型号	支架体 直径 mm	两端 直径 mm	支架 长度 cm
G48030	EVO-20-25-8-E	20	25	8
G48031	EVO-20-25-10-E	20	25	10
G48032	EVO-20-25-12.5-E	20	25	12.5
G48033	EVO-20-25-15-E	20	25	15

产品名称: 全覆膜食道支架系统
生产企业名称: Cook Ireland Ltd. 库克爱尔兰有限公司
注册证号: 国械注进 20153132364
产品名称: 食道支架系统
生产企业名称: Cook Ireland Ltd. 库克爱尔兰有限公司
注册证号: 国械注进 20153132713

广告批准文号: 沪械广审(文)第250425-08021号
禁忌内容或注意事项详见说明书



库克(中国)医疗贸易有限公司
中国上海市徐汇区天钥桥路333号腾飞大厦1503室
邮编: 200030
电话: +86-21-5451-9599
电邮: chinacssupport@cookmedical.com