

插管 | 气道交换 | 紧急气道

当需要分秒必争时, 您打算怎么做?



适用于困难气道的产品

建立和维护气道。

我们设计的气道管理产品有助于实现成功插管、气道交换和建立紧急气道通路。



目录

插管

Frova 插管导入器.....	7
Rapi-Fit 转换接头.....	8
Aintree 气道交换气管导管.....	9

气道交换

Cook® 气道交换气管导管 - 软头超硬.....	13
Cook® 气道交换气管导管.....	14
Arndt 气道交换导管套装.....	15

紧急气道

Melker 紧急环甲膜切开导管套装 - Seldinger.....	19
Melker 套囊式紧急环甲膜切开导管套装 - Seldinger.....	20
Melker 紧急特殊操作紧急环甲膜切开导管套装 - Seldinger.....	21
急诊环甲膜穿刺用气管导管.....	22



当您无法插管
但可以换气时，
我们有解决方案。

插管

我们的插管导入器可在初始插管完成后提供氧气并可以通过盲插和光纤导入放置进行协助。





Frova 插管导入器

用于帮助无法充分暴露声门的病人进行气管插管。



特性优势

- 此导入器采用成角度的钝头设计, 有助于将导入器经声门置入气管之内的恰当位置, 最大限度地减少对内部结构造成创伤。
- 当远端部分保持弹性时, 可选加强套管为导管近端和中部增加硬度。
- 内腔和远端侧孔用于输送氧气。
- 厘米标记便于准确对齐气管插管。
- 必要时, 可拆卸式 Rapi-Fit 转换接头可实现氧气输送。

组件

- Frova 插管导入器
- 加强套管
- Rapi-Fit 转换接头 (15 mm 接头)
- Rapi-Fit 转换接头 (路厄锁接头)

订货号码	产品型号	导入器直径 Fr	导入器长度 cm	适合在下列内径的 ETT ¹ 中放置 mm	包括转换接头 类型	数量
含加强套管						
G23646	C-CAE-14.0-70-FII	14	70	6号或更大	15 mm 和路厄锁	1
不含加强套管						
G23645	C-CAE-14.0-70-FI	14	70	6号或更大	15 mm 和路厄锁	1
仅导入器						
G48303	C-CAE-14.0-70-FIC	14	70	6号或更大	未包含	10
G53517	C-CAE-14.0-70-FIC-SPOPS ²	14	70	6号或更大	未包含	1

1. 不包括气管插管。
2. 采用 U 型包装, 便于携带和运输。


产品名称: 插管导入器
 生产企业名称: William Cook Europe ApS 库克欧洲公司
 注册号: 国械注进20182661765

Rapi-Fit 转换接头




我们的可拆卸式 Rapi-Fit 转换接头可搭配 15 mm 或路厄锁接头使用。必要时，这些转换接头允许气管导管连接通气装置，以在插入导管期间或交换程序中提供氧气。

大多数插管和气道交换产品都附送 Rapi-Fit 转换接头。

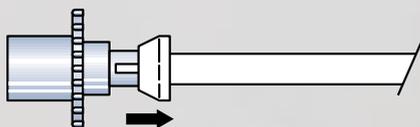


若要连接
将转换接头置于导管之上。向前拉动白色垫圈并将转换接头锁定在位置上。

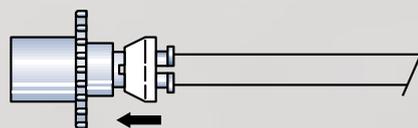

若要移除
向后拉动白色垫圈，将转换接头从导管中释放并移除。

Aintree 气道交换气管导管

用于纤支镜辅助插管以及情况不复杂的无创伤气管插管交换。

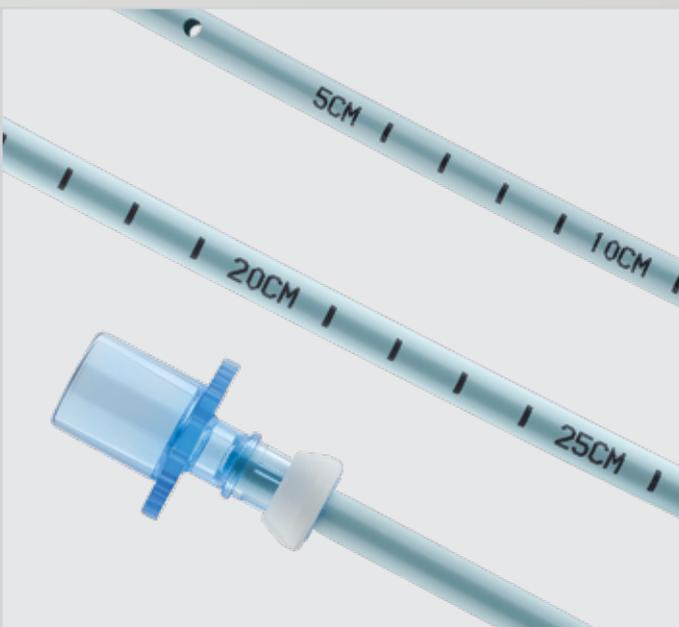

特性优势

- 气管的内径 (ID)、内腔以及远端侧孔用于加强空气流动。
- 大内径允许使用支气管镜，用于增强直视观察。
- 厘米标记便于准确对齐气管插管。
- 必要时，可拆卸式 Rapi-Fit 转换接头可实现氧气输送。

组件

- Aintree 气道交换气管导管
- 支气管镜接口
- Rapi-Fit 转换接头 (15 mm 接头)
- Rapi-Fit 转换接头 (路厄锁接头)

订货号码	产品型号	导管 Fr	导管长度 cm	导管内径 mm	适合在下列内径 的 ETT* 中放置 mm	包括转换接头 类型
G10789	C-CAE-19.0-56-AIC	19	56	4.7	7 号或更大	15 mm 和路厄锁

* 不包括气管插管。

产品名称:气道交换气管导管
 生产企业名称: Cook Incorporated 库克公司
 注册证号: 国械注进20142086079



我们可以实现
简单无创的交
换程序。

气道交换

我们的不透射线的气道交换气管导管提供各种不同的尺寸, 它们可在交换期间输送氧气。通过持续维持气道通路, 可以减少病人因氧气不足出现不良反应的几率。





Cook® 气道交换气管导管 - 软头超硬

用于情况不复杂的无创伤气管插管交换。



特性优势

- 导管采用柔软、有弹性的钝头设计, 不会对人体内部结构造成创伤。
- 导管的远端部分具有弹性。
- 特硬质导管便于双腔气管插管的交换。
- 内腔和远端侧孔用于输送氧气。
- 厘米标记便于准确对齐气管插管。
- 必要时, 在交换过程中, 可拆卸式 Rapi-Fit 转换接头可实现氧气输送。

组件

- Cook 气道交换气管导管 - 软头超硬
- Rapi-Fit 转换接头 (15 mm 接头)
- Rapi-Fit 转换接头 (路厄锁接头)


订货号码	产品型号	导管 Fr	导管长度 cm	导管内径 mm	适合在下列内径的 ETT* 中交换 mm	包括转换接头类型
G36401	C-CAE-11.0-100-DLT-EF-ST	11	100	2.3	4 号或更大	15 mm 和路厄锁
G36402	C-CAE-14.0-100-DLT-EF-ST	14	100	3	5 号或更大	15 mm 和路厄锁

* 不包括气管插管。

产品名称: 气道交换气管导管
 生产企业名称: Cook Incorporated 库克公司
 注册证号: 国械注进20142086079

Cook® 气道交换气管导管

用于情况不复杂的无创伤气管插管交换。

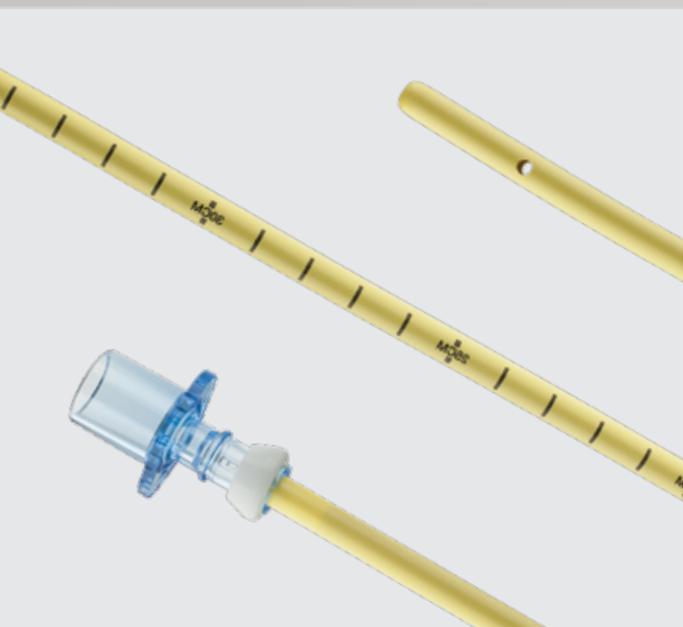

特性优势

- 采用柔软、有弹性的钝头设计，不会对人体内部结构造成创伤。
- 内腔和远端侧孔用于输送氧气。
- 厘米标记便于准确对齐气管插管。
- 必要时，在交换过程中，可拆卸式 Rapi-Fit 转换接头可实现氧气输送。

组件

- Cook 气道交换气管导管
- Rapi-Fit 转换接头 (15 mm 接头)
- Rapi-Fit 转换接头 (路厄锁接头)

订货号码	产品型号	导管 Fr	导管长度 cm	导管内径 mm	适合在下列内径的 ETT* 中交换 mm	包括转换接头类型
G07833	C-CAE-8.0-45	8	45	1.6	3 号或更大	15 mm 和路厄锁
G06732	C-CAE-11.0-83	11	83	2.3	4 号或更大	15 mm 和路厄锁
G07873	C-CAE-14.0-83	14	83	3	5 号或更大	15 mm 和路厄锁
G05880	C-CAE-19.0-83	19	83	3.4	7 号或更大	15 mm 和路厄锁

* 不包括气管插管。

产品名称:气道交换气管导管
生产企业名称: Cook Incorporated 库克公司
注册证号: 国械注进20142086079

产品名称:气道交换导管
生产企业名称: Cook Incorporated 库克公司
注册证号: 国械注进20142085598

Arndt 气道交换导管套装

用于在光纤支气管镜辅助下，经支气管镜通道、利用导丝及交换导管导引进行喉罩通气道和气管插管的交换。



特性优势

- 该套装可用于紧急、急症和选择性气道管理。
- 导管可以与支气管镜一起使用，实现直接可视化，以便于更清楚地导航患者的解剖结构。
- 导丝可以通过支气管镜的工作通道插入，从而可以进行锐角操控。
- 远端侧孔用于输送氧气。
- 厘米标记便于准确对齐气管插管。
- 必要时，在交换过程中，可拆卸式 Rapi-Fit 转换接头可使用氧气源。


组件

- Arndt 气道交换导管
- Amplatz 超硬支撑性导丝
- 双旋转接头
- Rapi-Fit 转换接头 (15 mm 接头)
- Rapi-Fit 转换接头 (路厄锁接头)

订货号码	产品型号	导管 Fr	导管长度 cm	导丝直径 inch	导丝长度 cm	适合在下列内径的 ETT* 中交换 mm	包括转换接头类型
G11920	C-CAE-14.0-70-LMA	14	70	0.038	160	5 号或更大	15 mm 和路厄锁

* 不包括气管插管。

产品名称:气道交换气管导管
 生产企业名称: Cook Incorporated 库克公司
 注册证号: 国械注进20142086079

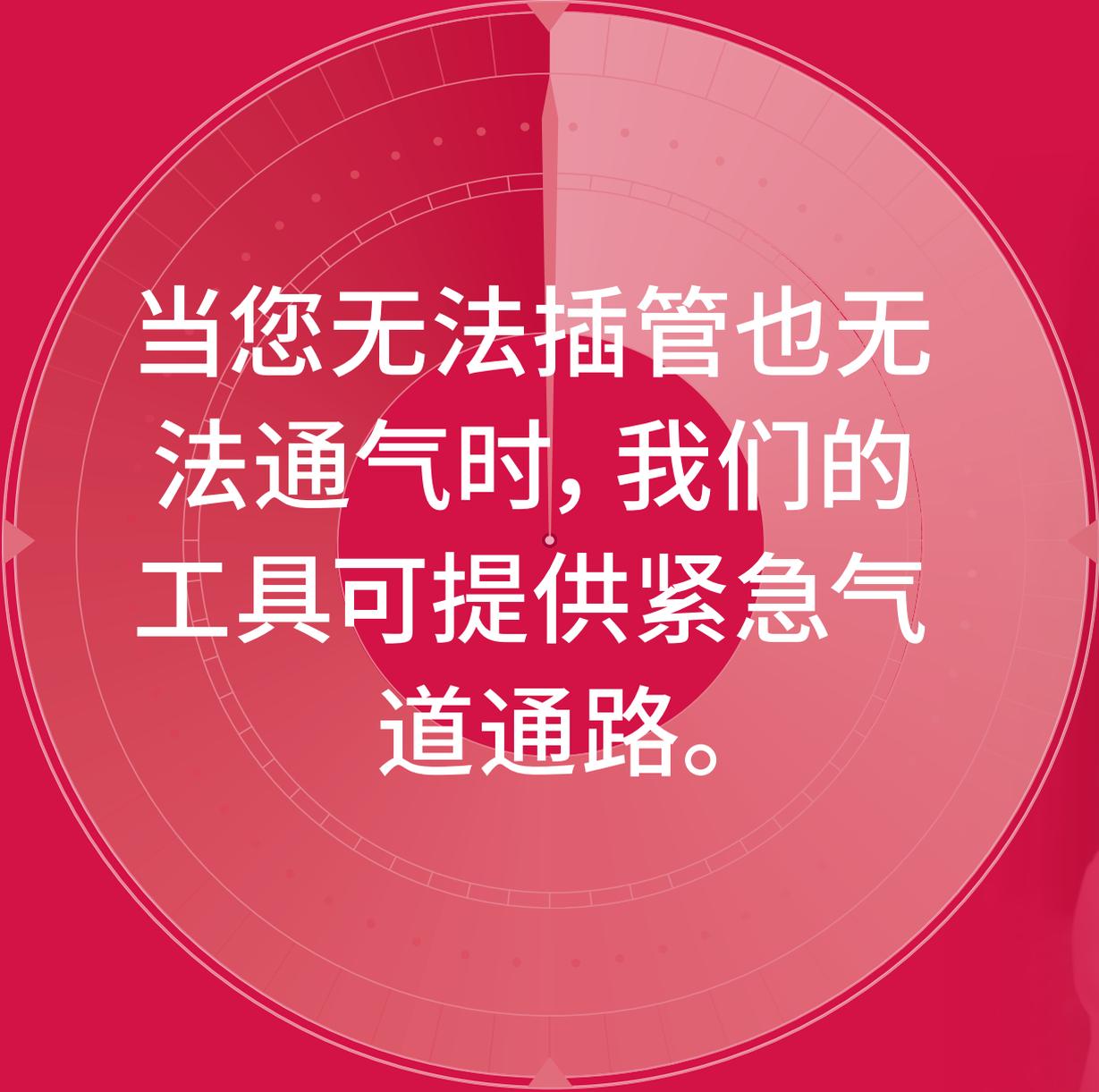


当您无法插管也无法通气时，我们的工具可提供紧急气道通路。

紧急气道

我们提供各种紧急通路产品, 包括 Seldinger 环甲膜切开导管和经气管穿刺导管。




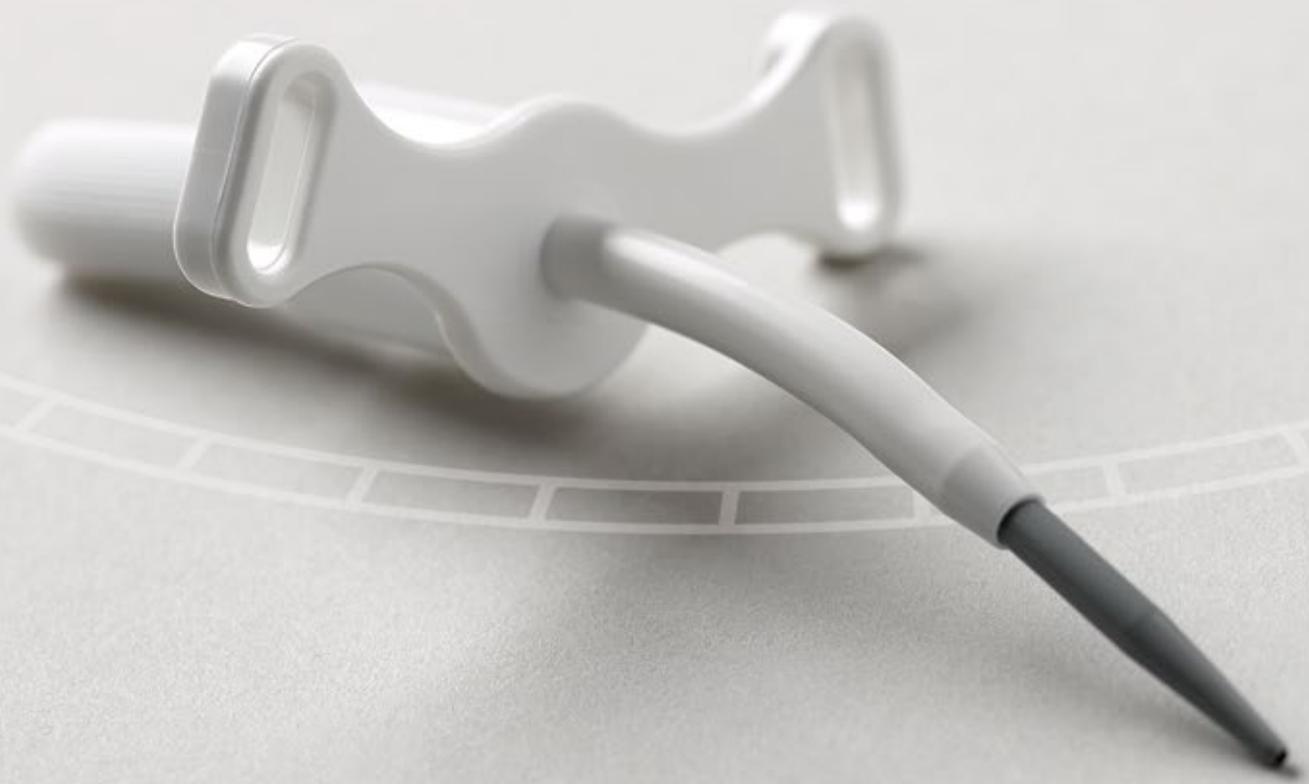

Melker 紧急环甲膜切开导管套装

Seldinger

用于无法执行气管插管时创建紧急气道通路。

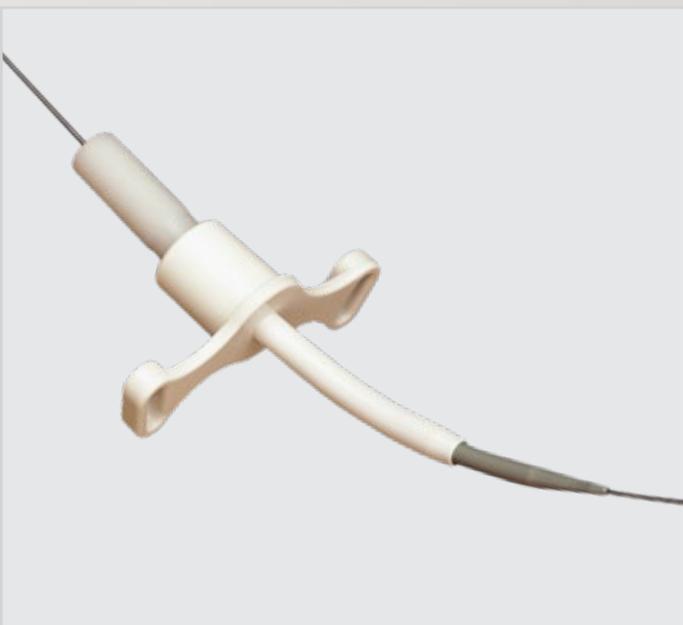

特性优势

- 使用Seldinger 技术经环甲膜实现气道通路的建立。
- 非套囊式气管导管具有三种不同尺寸, 可以应对各种患者解剖结构。

组件

- Melker 紧急环甲膜切开导管
- 导入针
- PTFE 套管针
- 6 mL 注射器
- 15 号迷你手术刀
- Amplatz 超硬支撑性导丝
- 曲式扩张器
- 气管切开术绷带


订货号码	产品型号	导管长度 cm	导管内径 mm	导管外径 mm
G06245	C-TCCS-350	3.8	3.5	5.1
G06246	C-TCCS-400	4.2	4	5.9
G04652	C-TCCS-600	7.5	6	8.8

产品名称: 急诊环甲膜切开导管
生产企业名称: Cook Incorporated 库克公司
注册证号: 国械注进20163662920

Melker 套囊式紧急环甲膜切开导管套装

Seldinger

用于无法执行气管插管时创建紧急气道通路。

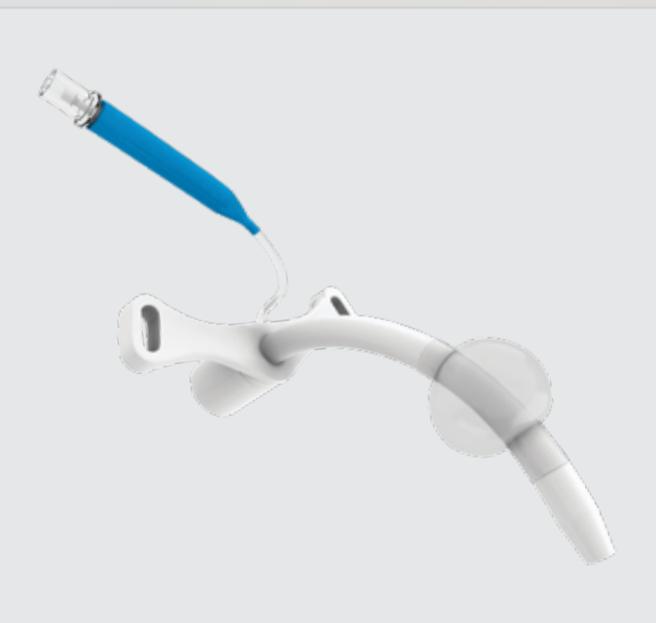

特性优势

- 使用穿透环甲膜 Seldinger 技术实现气道通路。
- 气管导管在其妥善安置后安装套囊以保护并控制气道。

组件

- Melker 套囊式紧急环甲膜切开导管
- 导入针
- PTFE 套管针
- 6 mL 注射器
- 15 号迷你手术刀
- Amplatz 超硬支撑性导丝
- 曲式扩张器
- 气管切开术绷带
- 穿刺针托杯

订货号码	产品型号	导管长度 cm	导管内径 mm	导管外径 mm
G29432	C-TCCSB-500	9	5	7.2

产品名称:急诊环甲膜切开导管
生产企业名称: Cook Incorporated 库克公司
注册证号: 国械注进20163662920

Melker 紧急特殊操作环甲膜切开导管套装

Seldinger

用于无法执行气管插管时创建紧急气道通路。



特性优势

- 使用 Seldinger 技术经环甲膜实现气道通路的建立。
- 每个套装都装在剥离袋中, 以便使用紧急车辆进行运输。
- 预先将扩张器插入气管导管以建立快速通路。
- 每个套装包含两根导入针 (分别为 5 cm 和 7 cm 长), 可以应对各种患者解剖结构。
- 配备囊套式导管的套装设计用于在放置后保护并控制气道。
- 配备无套囊式导管的套装具有两个气管导管尺寸选项。

组件

- Melker 紧急环甲膜切开导管
- 两根 18 G 导入针 (分别为 5 cm 和 7 cm 长)
- 6 mL 注射器
- 15 号迷你手术刀
- Amplatz 超硬支撑性导丝
- 曲式扩张器
- 气管切开术绷带

订货号码	产品型号	导管长度 cm	导管内径 mm	导管外径 mm
套囊式套装				
G26924	C-TCCSB-500-SPOPS	9	5	7.2
无套囊式套装				
G10699	C-TCCS-600-SPOPS	4.2, 7.5	4, 6	6, 8.8

产品名称: 急诊环甲膜切开导管
 生产企业名称: Cook Incorporated 库克公司
 注册证号: 国械注进20163662920

急诊环甲膜穿刺用气管导管

无法执行常规气管内管插管时，用于紧急气道通路。



特性优势

- 导管采用线圈加固，以防扭结。

组件

- 急诊环甲膜穿刺用气管导管
- 预先装配的导入针
- 加固型 FEP 导管

订货号码	产品型号	导管 Fr	导管长度 cm	导管内径 mm	导管针 G
G10338	C-DTJV-6.0-5.0-BTT	6	5	2	15
G09413	C-DTJV-6.0-7.5-BTT	6	7.5	2	15

产品名称:环甲膜穿刺用气管导管
生产企业名称: Cook Incorporated 库克公司
注册证号: 国械注进20182082374

广告批准文号:沪械广审(文)第2019083501号
禁忌内容或注意事项详见说明书



库克(中国)医疗贸易有限公司
中国上海市天钥桥路333号腾飞大厦1503室
邮编: 200030
电话: +86-21-5451-9599
传真: +86-21-5451-9595
邮箱: ChinaCSsupport@cookmedical.com