


Seeing isn't just believing,
it's everything.

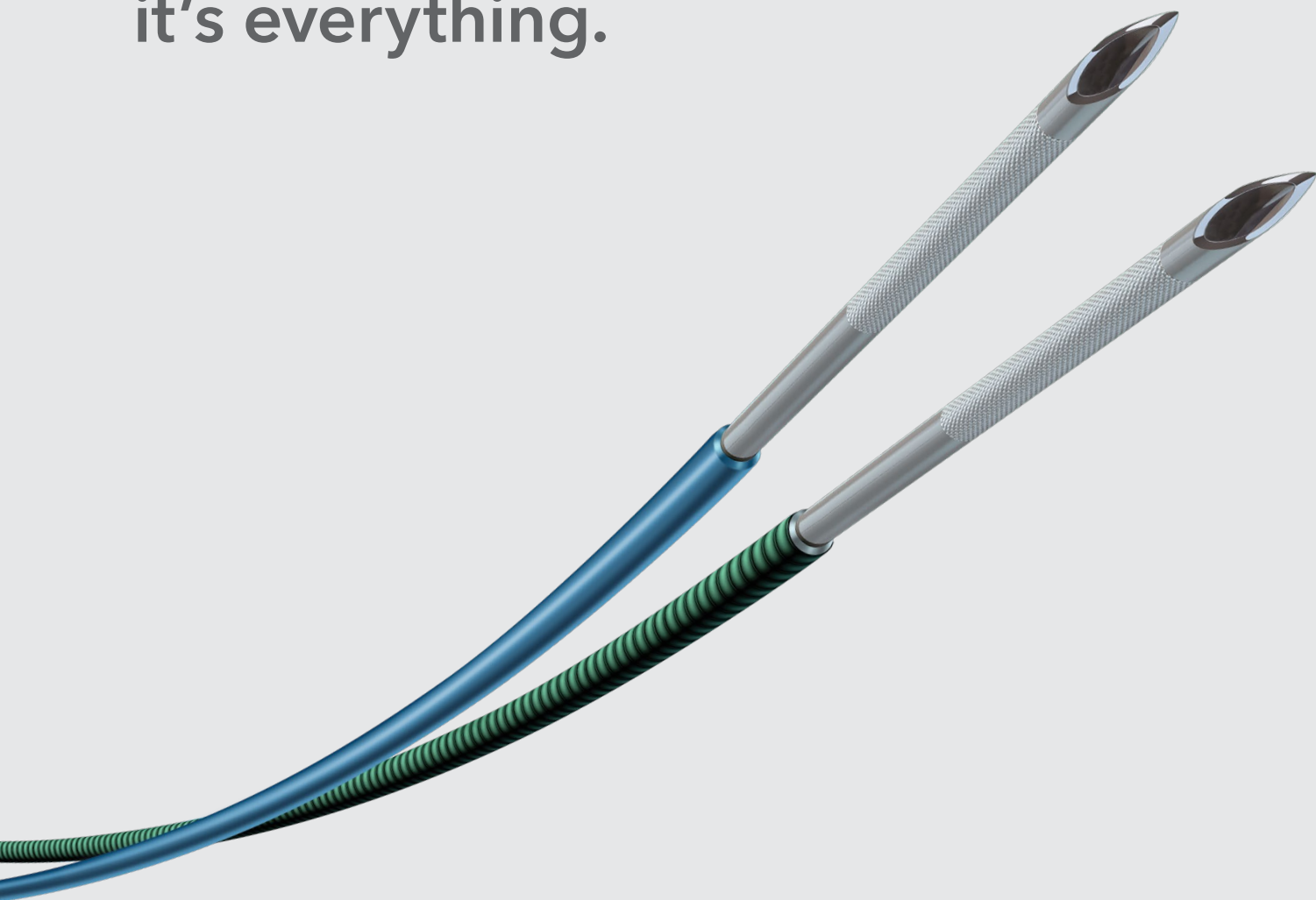


EchoTip® Ultra

ENDOSCOPIC ULTRASOUND NEEDLE

Balancing needle visualization, flexibility and ergonomics.


今日の複雑な超音波内視鏡下処置では、穿刺針の視認性、柔軟性、正確な穿刺コントロールが従来以上に求められています。

EchoTip Ultra は、優れた視認性と柔軟なコイルスプリング式シース* を備え、サンプリングが困難な病変へのアクセスへ貢献します。

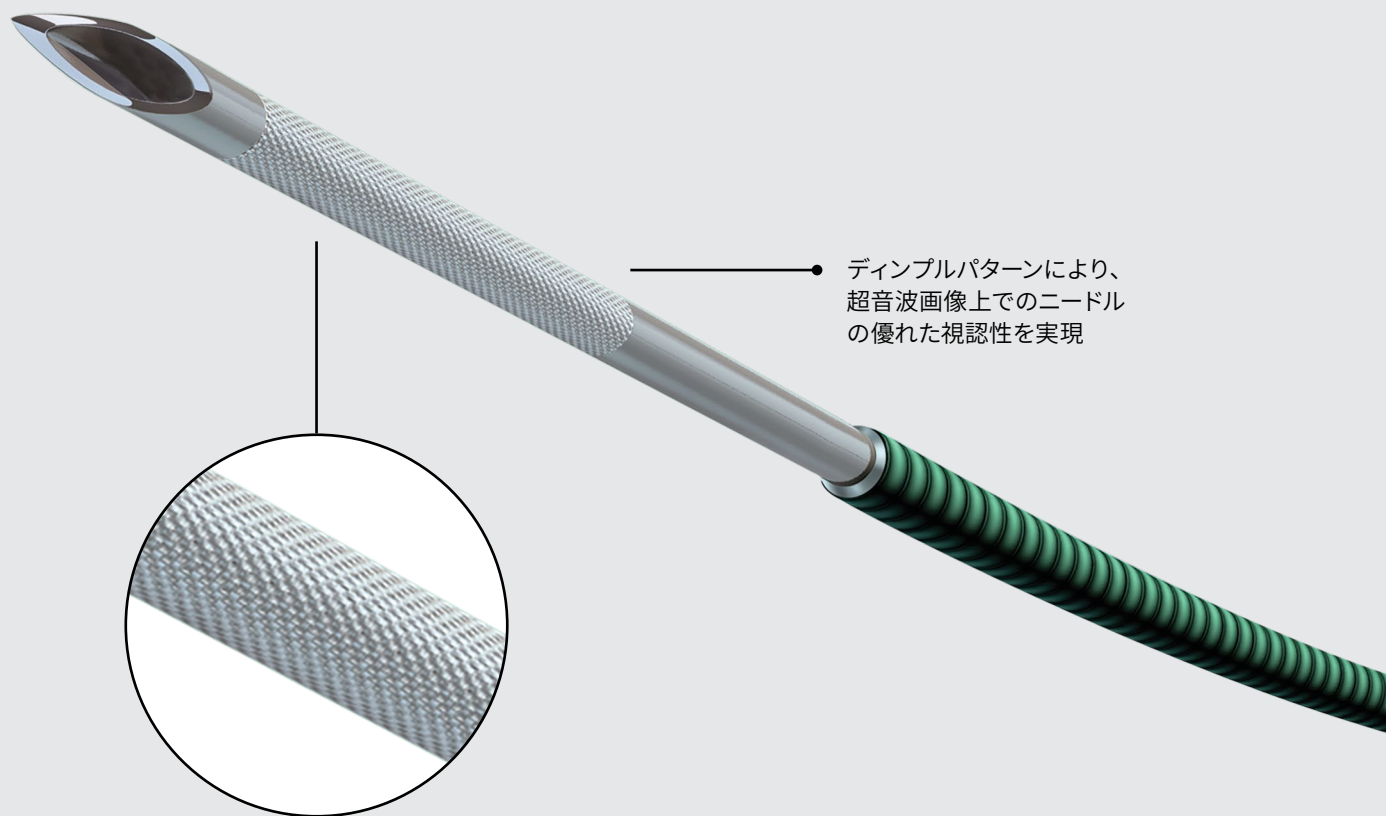


デンプルパターンにより、
超音波画像上でのニードル
の優れた視認性を実現

* EchoTip Ultra 22ゲージ (ECHO-3-22)

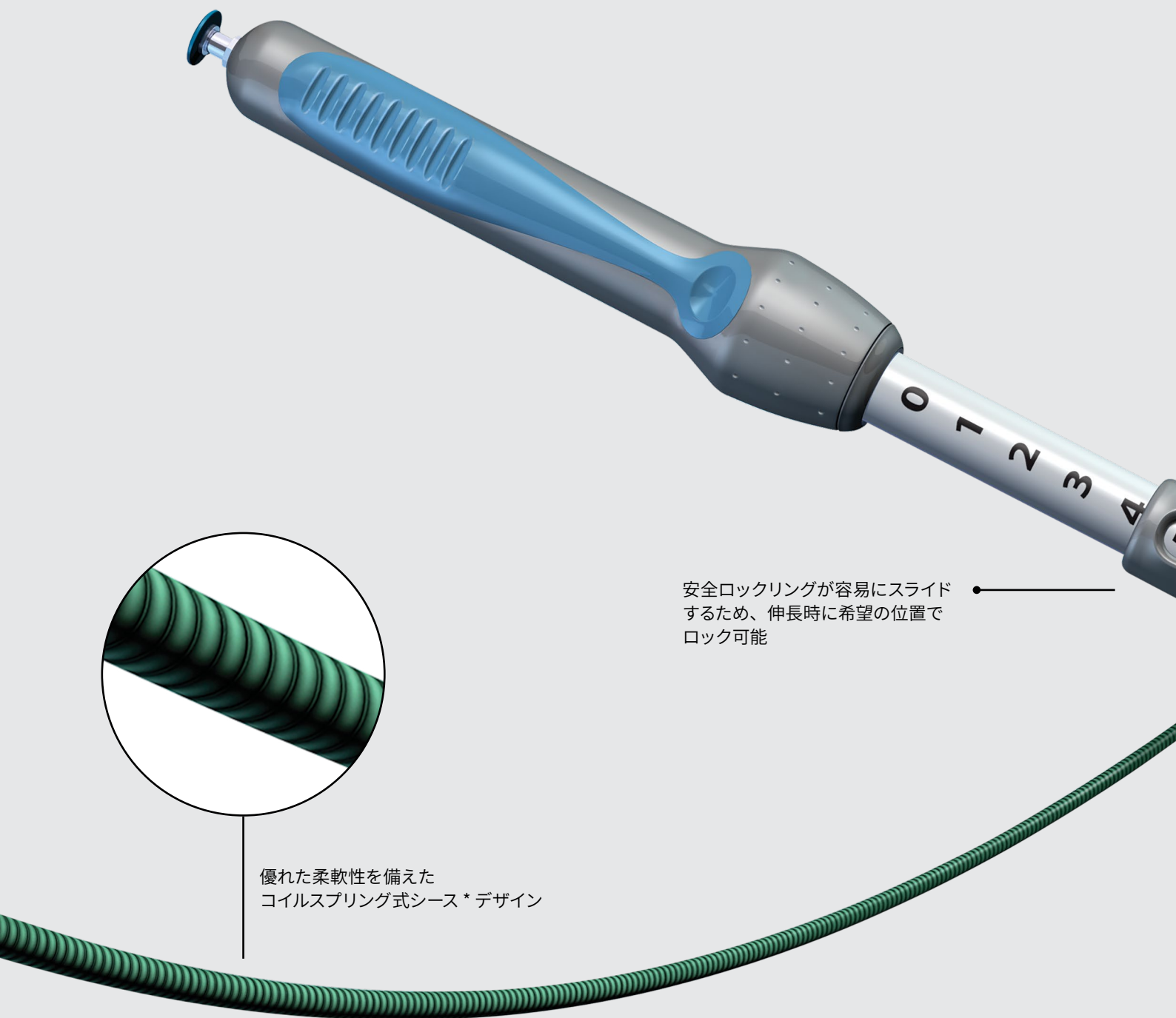

安全ロックリングが容易にスライド
するため、伸長時に希望の位置で
ロック可能

優れた柔軟性を備えた
コイルスプリング式シース * デザイン


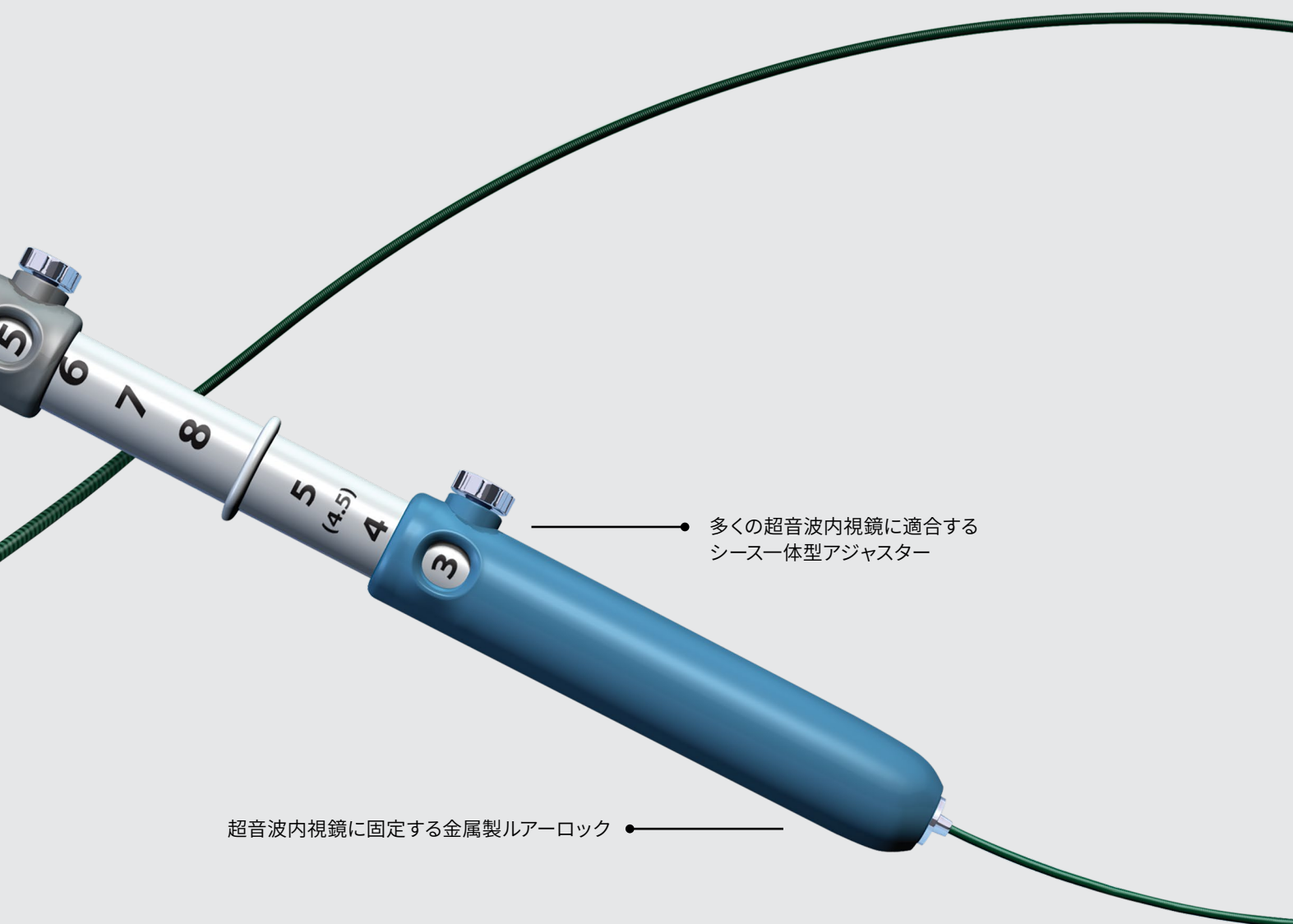


多くの超音波内視鏡に適合する
シーソー型アジャスター

超音波内視鏡に固定する金属製ルアーロック

3 platforms – all with enhanced needle visualization

超音波内視鏡下の穿刺処置ではニードルの高精度の画像が得られることが手技を成功へ導きます。EchoTip Ultra ニードルの先端部は独自のディンプリング技術を採用し、視認性を改善しています。

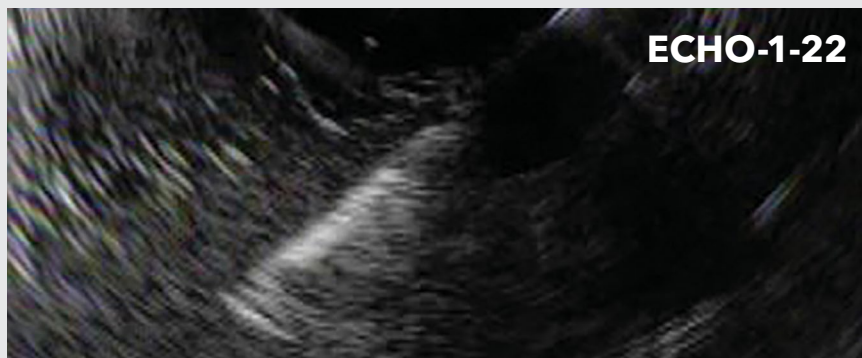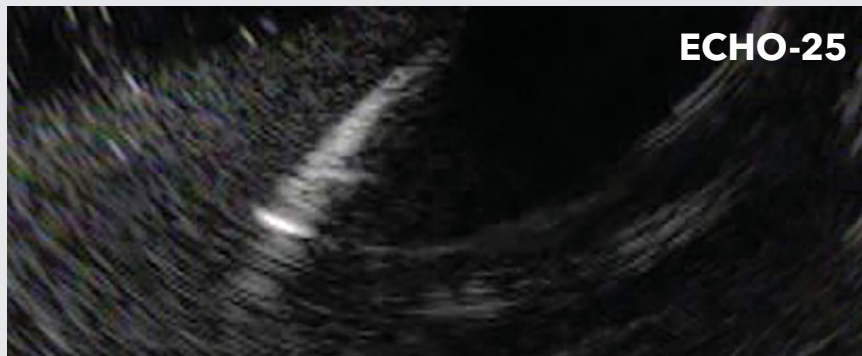

製品仕様

高精細ディンプリングパターンにより、エコージェニックに優れたニードルは超音波による画像検出を容易にし、目標位置への穿刺精度を向上。

滅菌済み、単回使用のディスポーザブル製品です。

グローバル 製品番号	カタログ番号	ニードルサイズ ゲージ	シース サイズ Fr	ニードル 伸長可能域 cm	スタイレット タイプ	最小適合鉗子 チャンネル mm
G31520	ECHO-19	19	5.2-4.3	0-8	ボール型チップ	2.8
G31518	ECHO-1-22	22	5.2	0-8	ボール型チップ	2.8
G31521	ECHO-3-22	22	5.4	0-8	ボール型チップ	2.8
G31519	ECHO-25	25	5.2	0-8	ボール型チップ	2.8

販売名：ニードルカテーテル
認証番号：21100BZY00604000

製造販売元
クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL：03-6853-9470
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service
Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4426793000, india.orders@cookmedical.com
Japan: +81 368539470, info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 79621688, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
Taiwan: +866 266283500, cooktwn@cookmedical.com
Thailand: +662 1688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com

