



顺畅、便捷的乳头插管
是 ERCP* 重要的一环。

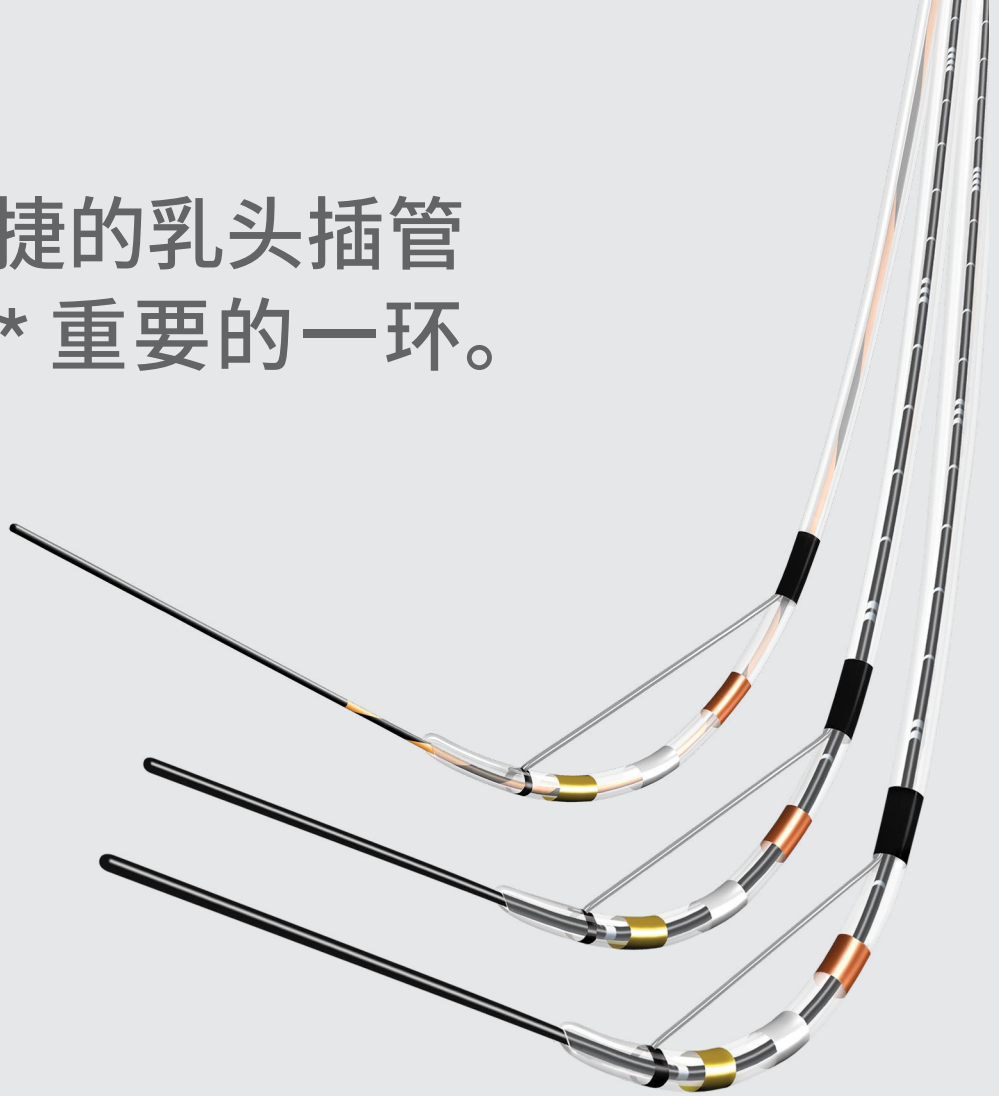

D.A.S.H.系列
乳头括约肌切割器

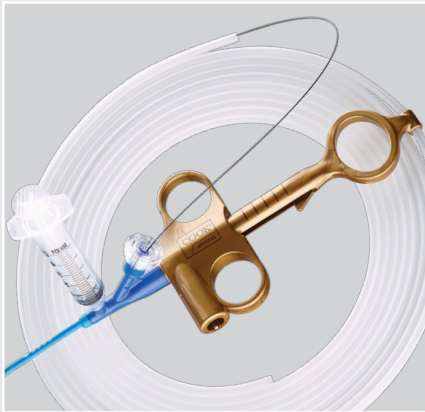

D.A.S.H.系列 乳头括约肌切割器

用于胰胆管系统插管和括约肌切开术。若预先放置，也可在难度较大的胆道狭窄状况中协助内窥镜逆行胰胆管造影 (ERCP) 操作。

- DomeTip (圆头) 设计基于解剖结构而设计提供可潜在减少创伤的插管方式
- 定制的 3-D 塑形钢丝确保可靠的切割刀丝方向
- 集成式手柄设计在双腔平台上提供三腔功能，让您保持导丝在位的同时可以注射造影剂
- 挂扣于手柄上的导丝盘兼顾了人体工学设计，可以提高操作效率
- 根据需要可选择预装 0.021", 0.025" 或 0.035" 导丝的相应型号

订货号码	产品型号	鞘管外径 mm/Fr	切割丝 长度 mm	鞘管可通过 导丝直径 mm/英寸	导丝长度 cm
G26850	DASH-21	1.8/5.4	25	0.53/0.021	不适用
G25224	DASH-1	2.1/6.3	25	0.64/0.025	不适用
G54193	DASH-35	2.2/6.6	25	0.89/0.035	不适用
预装 ACROBAT® 2 导丝					
G57298	DASH-AWG2-25-450	2.1/6.3	25	0.64/0.025	450
G57300	DASH-AWG2-35-450	2.2/6.6	25	0.89/0.025	450
G57299	DASH-AWG2-35-260	2.2/6.6	25	0.89/0.035	260
预装 Tracer Metro™ Direct™ 导丝					
G25790	DASH-21-480	1.8/5.4	25	0.53/0.021	480
G25225	DASH-260	2.1/6.3	25	0.64/0.025	260
G25227	DASH-480	2.1/6.3	25	0.64/0.025	480
G25666	DASH-35-480	2.2/6.6	25	0.89/0.035	480

电源线需要另外购买。

产品名称: 乳头括约肌切割器
 生产企业名称: 威尔逊-库克医学公司 Wilson-Cook Medical Incorporated
 注册证号: 国械注进 20153014155
 广告批准文号: 沪械广审(文)第 291210-86240 号
 禁忌内容或注意事项详见说明书



库克 (中国) 医疗贸易有限公司
 中国上海市徐汇区天钥桥路333号腾飞大厦1503室
 邮编: 200030
 电话: +86-21-5451-9599
 电邮: chinacssupport@cookmedical.com
 cookmedical.com.cn