


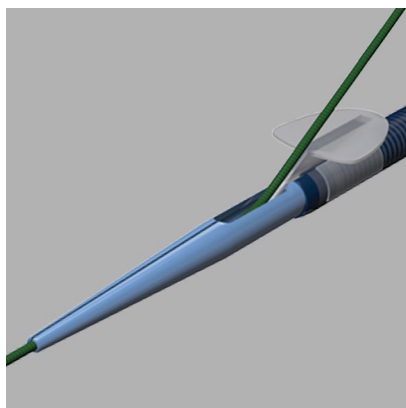


Flexor® Parallel™

Rapid Release™ 尿管アクセスシース

ラピッドリリース法を使用する場合、Flexor Parallelを留置されているガイドワイヤに沿ってダイレーターの先端開口部より挿入します。シースを目的の位置に留置後、ダイレーターを抜去します。これにより、ガイドワイヤをダイレーターチップから素早く開放し、シース外に留置する事が出来ます。この方法を使用することで、フリーなワーキングチャネルの確保とセーフティワイヤによる尿路確保を実現できます。

ラピッドリリース法によって、手技のステップが一つ減り、又手術中に使用する製品・在庫の削減に繋がります。

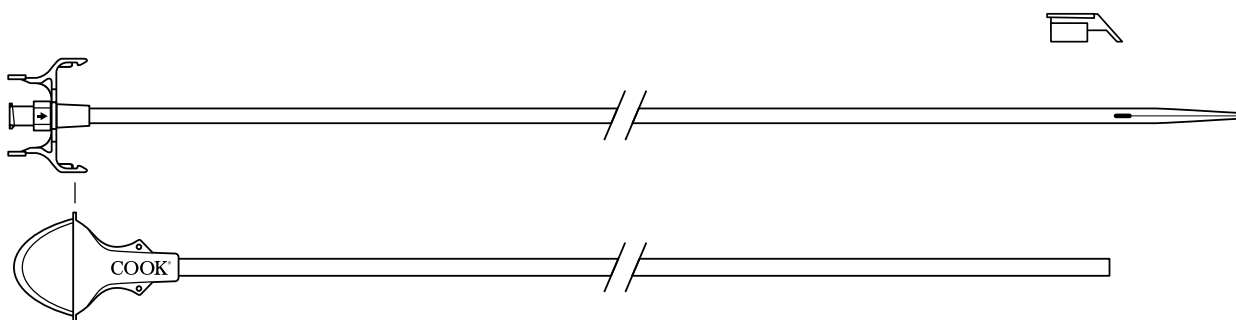

グローバル 製品番号	カタログ番号	内径 Fr	長さ cm
G56428	FUS-095020-P	9.5	20
G56429	FUS-095028-P	9.5	28
G56430	FUS-095035-P	9.5	35
G56431	FUS-095045-P	9.5	45
G56432	FUS-095055-P	9.5	55
G34871	FUS-107020-P	10.7	20
G34872	FUS-107028-P	10.7	28
G34873	FUS-107035-P	10.7	35
G34874	FUS-107045-P	10.7	45
G34875	FUS-107055-P	10.7	55
G56433	FUS-120020-P	12.0	20
G56434	FUS-120028-P	12.0	28
G56435	FUS-120035-P	12.0	35
G56436	FUS-120045-P	12.0	45
G56438	FUS-120055-P	12.0	55
G56439	FUS-140020-P	14.0	20
G56440	FUS-140028-P	14.0	28
G56441	FUS-140035-P	14.0	35
G56442	FUS-140045-P	14.0	45
G56443	FUS-140055-P	14.0	55

販売名：Flexor尿管アクセスシース
 認証番号：301AABZX00042000
 保険算定区分：Ⅱ135尿路拡張用カテーテル(1)尿管・尿道用



製造販売元
 クックメディカルジャパン合同会社
 〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
 中野セントラルパークイースト
 TEL:03-6853-9470
 cookmedical.co.jp