

每秒必争。



Coda™
球囊导管¹

Coda LP™
球囊导管¹




1. 产品名称: 球囊导管 Coda and Coda LP Balloon Catheter

订货号码	产品型号	导管外径 mm	导管 有效长度 cm	推荐 导入鞘 Fr	匹配 导丝 直径 inch	球囊最大 充盈 直径 mm	球囊最大 充盈 容积 cc
Coda LP™							
G03831	CODA-2-9.0-35-120-32	3.0	120	12.0	0.035	32	30
Coda™							
G23773	CODA-2-10.0-35-140-46*	3.35	140	14.0	0.035	46	60

*不得将 Coda™ 46 mm 球囊导管用于扩张髂动脉或其他非主动脉血管中的人造血管, 否则可能造成血管壁损伤和/或血管破裂。不得将 Coda™ 46 mm 球囊导管用于直径小于 24 mm 的血管。

- ① **充盈直径**
市售球囊的最大充盈直径为 32 mm 或 46 mm。
- ② **导管有效长度**
导管有效长度为 120 cm 或 140 cm。
- ③ **材质**
CODA™ 球囊是采用顺应性的聚氨酯材料制成。
- ④ **不透射线标记**
球囊导管上设有不透射线标记带, 以便于在X射线下确定其位置。

Coda™ 和 Coda LP™ 球囊导管设计用于大血管的临时性闭塞或扩张人造血管。

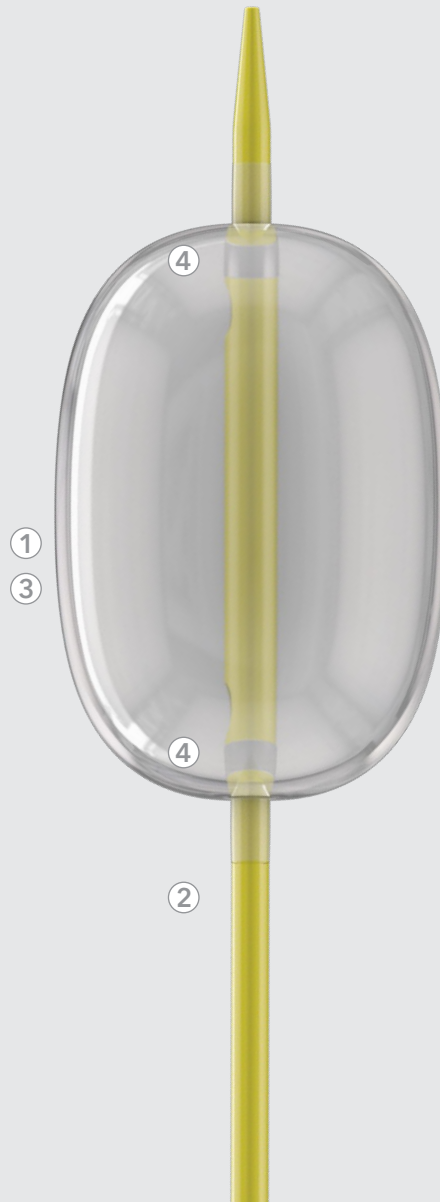

产品名称: 球囊导管
生产企业名称: Cook Incorporated 库克公司
注册证号: 国械注进20163775084

广告批准文号: 沪械广审(文)第211219-11010号
禁忌内容或注意事项详见说明书



库克(中国)医疗贸易有限公司
中国上海市徐汇区天钥桥路333号腾飞大厦1503室
邮编: 200030
电话: +86-21-5451-9599
电邮: chinacssupport@cookmedical.com