




Neff アクセスセット

2ステップ方式で、インターベンショナルラジオロジー手技における0.038 inch 径ガイドワイヤの配置を容易にします。

- エックス線不透過性マーカを備えたイントロデューサーセットは、シースの先端の位置を確認しやすく、正確な配置に役立ちます。
- 0.018 inch 径ガイドワイヤをシースに挿入したまま、0.038 inch 径ガイドワイヤを挿入することができます。
- 親水性コーティングを施したイントロデューサーセットは、挿入中の摩擦抵抗を軽減します。
- EchoTip® が備わっている穿刺針では、超音波診断装置での視認性が高まります。

構成

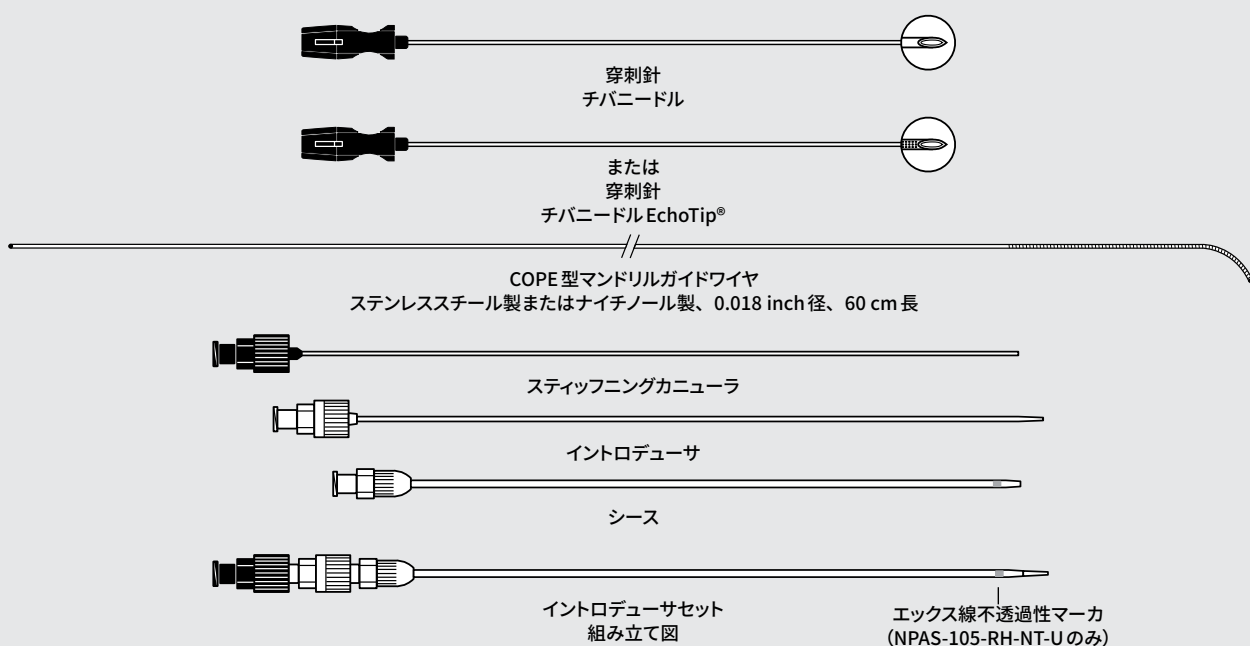

グローバル 製品番号	カタログ番号	シース 内径/外径 Fr	穿刺針 ゲージ/長 G/cm	穿刺針 先端形状
G04267	NPAS-100	4/7	22/15	チバニードル
G10797	NPAS-105-RH-NT-U	4/6	22/20	チバニードル EchoTip®

*NPAS-100 はステンレス製ガイドワイヤを採用

*NPAS-105-RH-NT-U はナイチノール製ガイドワイヤを採用。シースは親水性コーティング加工・エックス線不透過性マーカ付

製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL: 03-6853-9470
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4426793000, india.orders@cookmedical.com
Japan: +81 368539470, info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 79621688, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
Taiwan: +866 266283500, cooktwn@cookmedical.com
Thailand: +662 1688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com

